


NÁVOD PRO UŽIVATELE



3D DIAGNOSIS



IMPLANTS PLANNING &
IMMEDIATE LOADING
PROSTHESIS DESIGN

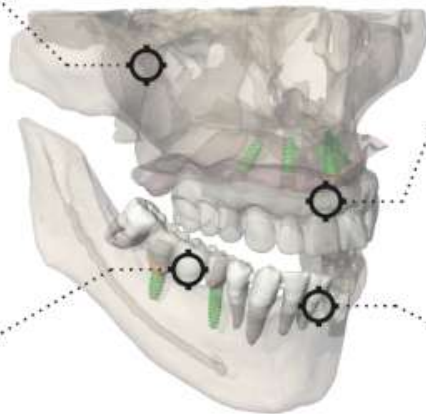

CROWNS & BRIDGES
MODELLING



SURGICAL GUIDE
DESIGN



CE
0051



 **RealGUIDE™**
UNIVERSAL OPEN SYSTEM

Manufactured by



3DIEMME Srl
www.3diemme.it

Contents

Odmítnutí odpovědnosti.....	7
1. Úvod a přehled.....	8
1.1. Obecné informace.....	8
1.2. Obecný popis produktu.....	9
1.3. Zamýšlené použití a indikace k použití.....	10
1.4. Popis softwaru	12
1.5. Informace o kompatibilitě.....	15
1.6. Přesnost a preciznost.....	15
1.7. Požadavky na počítač a hardware.....	15
1.8. Populace pacientů.....	17
1.9. Profil uživatele.....	17
1.10. Použijte prostředí.....	18
1.11. Princip fungování	18
1.12. Kontraindikace	18
1.13. Varování	18
1.14. Kybernetická bezpečnost	20
1.15. Instalace	24

1.15.1. Postup instalace aplikace RealGUIDE™ (verze pro Microsoft Windows).....	24
1.15.2. Kroky k instalaci aplikace RealGUIDE™ (verze pro macOS).....	24
1.15.3. Kroky k instalaci aplikace RealGUIDE™ (verze pro iOS)	25
1.16. Spuštění.....	25
1.17. Vypnutí.....	25
1.18. Odinstalace	26
1.19. Aktualizace	26
2. Začínáme	30
2.1. Domovská stránka	30
2.2. Přihlásit se	31
2.3. Složka nového pacienta	34
2.3.1. EXPORT SOUBORU STL	36
2.3.2. EXPORT SOUBORU STL	37
2.3.3. IMPORT 3D ZKOUŠKY/PROJEKTU.....	38
2.3.4. IMPORT 3D ZKOUŠKY/PROJEKTU.....	39
2.3.5. IMPORTOVAT NOVÉ OBJEKTY.....	40

2.4.	Nahrávání na CLOUD	41
2.5.	CLOUDové úložiště pacientů.....	43
2.6.	Sdílení	44
2.7.	Projekt ke stažení.....	46
2.8.	Upravený projekt ke stažení	47
3.	Běžné funkce horní nástrojové lišty	48
3.1.	Běžné funkce	48
3.2.	Nastavení.....	50
3.3.	NÁPOVĚDA	51
4.	Plánování implantátů	52
4.1.	Základní příkazy	52
4.2.	Otevření 3D pohledu	53
4.3.	Hlavní rozvržení	54
4.4.	Nastavení VOI	55
4.4.1.	OŘEZÁVÁNÍ.....	56
4.4.2.	TVAROVÁNÍ	57
4.5.	Nastavení 3D.....	58
4.6.	Import dat.....	59

4.7.	Odpovídající	60
4.8.	Nastavení CPR.....	63
4.9.	Kreslení nervů.....	65
4.10.	Nastavení zubů.....	66
4.11.	Poloha implantátu	67
4.11.1.	KNIHOVNA IMPLANTÁTŮ	68
4.11.2.	NASTAVENÍ POLOHY IMPLANTÁTU	69
4.11.3.	VÝBĚR PROTETICKÝCH ABUTMENTŮ.....	70
4.11.4.	OTÁČENÍ OSY.....	71
4.11.5.	ROVNOBĚŽNOST OS PROTÉZ.....	72
5.	Pokročilé nástroje	74
5.1.	TMJ	74
6.	Konstrukce chirurgické šablony	75
6.1.	Spuštění procesu	75
6.2.	Nastavení blokování podříznutí	76
6.2.1.	SMĚR VLOŽENÍ - OVLÁDACÍ ŠÍPKA.....	77

6.2.2.	SMĚR VLOŽENÍ - SMĚR ZOBRAZENÍ	78
6.2.3.	GENEROVÁNÍ VOSKOVANÉHO POVRCHU.....	79
6.2.4.	Parametry trasování a konstrukce.....	80
6.3.	Nástroje pro modelování	81
6.4.	Okna pro kontrolu a opětovné podání anestetik	82
6.5.	Finalizace	83
7.	Segmentace.....	84
7.1.	Segmentace zubů	84
7.2.	Segmentace kosti.....	86
8.	Sandbox.....	88
9.	CAD.....	90
	Definice slovníku symbolů	96

Odmítnutí odpovědnosti

Tištěnou verzi tohoto dokumentu si můžete vyžádat na níže uvedených kontaktních údajích. Přeprava bude provedena do 7 pracovních dnů bez dalších nákladů pro uživatele.

Uživatel RealGUIDE™ je zodpovědný za to, aby určil, zda je jakýkoli produkt nebo léčba vhodná pro konkrétního pacienta a okolnosti. Uživatel softwaru RealGUIDE™ nese výhradní odpovědnost za správnost, úplnost a přiměřenost všech údajů zadaných do softwaru RealGUIDE™. Uživatel musí zkontrolovat správnost a přesnost plánování pomocí softwaru RealGUIDE™ a posoudit každý jednotlivý případ.

Za správné dimenzování chirurgické šablony a použití validovaných pracovních postupů odpovídá výhradně uživatel.

RealGUIDE™ se prodává samostatně. Uživatel je zodpovědný za hardware potřebný k jeho spuštění. Další podrobnosti naleznete v kapitole Hardwarové požadavky (strana 15).

Podmínky používání softwaru RealGUIDE™ jsou uvedeny v licenční smlouvě, která je dostupná v softwaru a na webových stránkách.

1. Úvod a přehled

1.1. Obecné informace

Výrobce:	3DIEMME Srl
Adresa:	Via Risorgimento 9, 22063 Cantù (CO), ITÁLIE
Výrobní místo:	Via delle Baraggette 10, 22060 Figino Serenza (CO), ITÁLIE P +39 031 7073353 - F +39 031 710284
Název produktu:	RealGUIDE™
Verze softwaru:	5.4
Verze:	RealGUIDE APP, RealGUIDE PRO, RealGUIDE DESIGN, RealGUIDE START, RealGUIDE CAD, RealGUIDE CAD+
Webové stránky:	www.3diemme.it

V případech, kdy je RealGUIDE zakoupen od distributora a ne přímo od 3Diemme, je třeba kontaktovat distributora. Kontaktní údaje jsou k dispozici v digitálním štítku softwaru (Nastavení>Info).

1.2. Obecný popis produktu

Software RealGUIDE™ je plně vybavená aplikace pro 3D zobrazování v medicíně, která je určena pro více platform, běží na PC, Mac a mobilních zařízeních (není poskytována společností 3DIEMME).

RealGUIDE™ je k dispozici v řadě variant, které mají stejné základní funkce, ale liší se barvami grafického uživatelského rozhraní a obchodním názvem. Další informace si můžete vyžádat na níže uvedených kontaktních údajích společnosti 3Diemme.

RealGUIDE™ je otevřený software, který obsahuje knihovny třetích stran nezbytné pro plánování zubních operací a návrh chirurgických šablon, za jejichž správnost odpovídá výhradně výrobce.

Verze	UDI-DI
RealGUIDE™ APP	08050038830003
RealGUIDE™ PRO	08050038830010
RealGUIDE™ DESIGN	08050038830027
RealGUIDE™ START	08050038830034
RealGUIDE™ CAD	08050038830041
RealGUIDE™ CAD+	08050038830058

Software je prodáván prostřednictvím licenčního systému. Další informace naleznete v komerční brožuře nebo si je vyžádejte na výše uvedených kontaktních údajích/místním distributorovi.


RealGUIDE™ je určen pro vícenásobné použití u více pacientů.

1.3. Zamýšlené použití a indikace k použití


Jedná se o software, který mohou vyškolení odborníci používat v oblasti zubního lékařství k podpoře diagnostiky, k plánování virtuálních implantátů a operací na 2D/3D rekonstrukcích, k navrhování chirurgických šablon a modelování protéz a k řízení endodontických, ortodontických a ortognátních zákroků spojených s rehabilitací ústní dutiny a čelistí.

Software RealGUIDE™ je určen pro následující použití:

1. *Podpora diagnózy pro vyškolené odborníky.* Vstupní soubory DICOM pořízené skenerem CT/MRI se nijak neupravují, ale zobrazují se lékaři pomocí klasických zobrazovacích a objemových renderovacích technik. Jedná se o samostatný produkt. Žádné informace o pacientovi se nemění, všechny parametry použité pro zpracování obrazu se načítají ze samotného souboru DICOM. Neprovádí se automatická diagnostika ani automatická detekce onemocnění. Tento software není připojen k žádným lékařským přístrojům a neovládá žádné lékařské zařízení ani zařízení dodávající energii. Uživatel importuje data DICOM pocházející z libovolného zobrazovacího zařízení CT/CBCT/MR a software mu umožňuje zobrazit vyšetření pacienta v různých vícerozinných 2D obrazech a snadno rekonstruovat 3D objem pro okamžitou vizualizaci kostních struktur a okolních tkání.

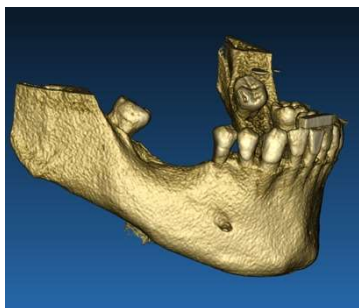



3D rekonstrukce z příkladu DICOM

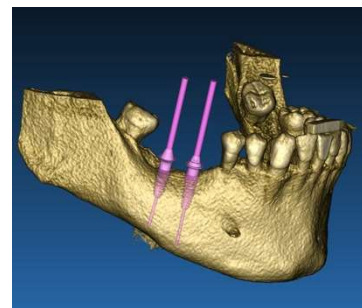

Plán virtuálních implantátů

2. *Virtuální plánování operace.* Lékaři mohou plánovat virtuální implantáty a operace na 2D/3D rekonstrukcích a exportovat projekty v otevřeném nebo proprietárním formátu pro další zpracování. Uživatel si může vybrat různé modely implantátů (například modely zubních implantátů) z knihovny poskytnuté výrobcí a simulovat jejich umístění v rekonstruovaném objemu pacienta (tato operace se nazývá „virtuální plán“).

Chirurgické šablony a protetické modelování. Virtuální plán slouží k návrhu chirurgické šablony, který lékař používá k řízení chirurgických vrtáků podle plánovaného směru a hloubky implantátů. Tuto chirurgickou šablonu lze vyrobít na libovolné 3D tiskárně ze souborů STL. Uživatel může také navrhnout pacientovu protézu (typicky zubní náhradu) pomocí nástrojů pro volné tvarování povrchu a objemu, které jsou v softwaru implementovány. Výsledek se exportuje ve formátu STL pro 3D tisk nebo technologie CAD/CAM.

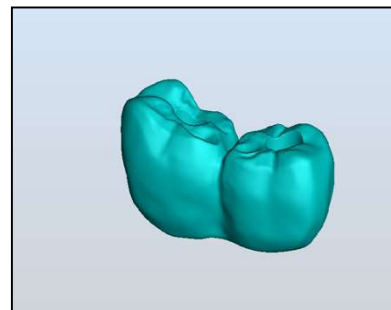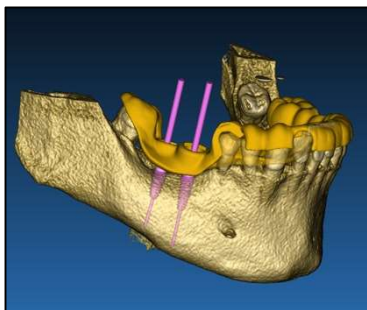

Chirurgická šablona určená ke správnému pohonu chirurgických vrtáků a modelovaných zubních protéz.

1.4. Popis softwaru

Software RealGUIDE™ dokáže zobrazit rentgenologické snímky ústní/čelistní dutiny. Uživatel pak může procházet různými pohledy, segmentovanou analýzou a 3D perspektivou. Kromě toho může uživatel simulovat různé objekty na snímku pro účely plánování léčby.

Po dokončení plánování léčby a vizuální simulace mohou uživatelé vytvářet zprávy a simulované snímky pro účely hodnocení a diagnostiky, a také provést chirurgickou šablону a modelování protézy, které lze exportovat ve formátu STL pro výrobu na libovolném RP nebo CAD/CAM stroji.

Software RealGUIDE™ podporuje všechny běžné funkce 3D lékařského zobrazování, které používají profesionální lékaři pro podporu své diagnostiky. Zahrnuje různé nástroje pro vykreslování objemů a izopovrchů, nástroje pro segmentaci, maskování a tvarování, MPR, 2D a 3D měření a analýzu. Vzhledem k tomu, že 2D zobrazení je stále důležitou funkcí, je

možné jediným kliknutím přepnout na 2D zobrazení, použít ještě sofistikovanější zobrazení MPR nebo přepnout zpět na 3D zobrazení.

Software RealGUIDE™ se vyznačuje intuitivním uživatelským rozhraním, 2D, MPR a 3D zobrazováním, špičkovou kvalitou obrazu a rozsáhlými možnostmi vizualizace, rychlým vykreslováním obrazu, nástroji pro měření a analýzu a snadným integrovaným reportováním. Software integruje všechny nástroje pro povrchové a objemové modelování, které jsou nezbytné pro integraci diagnostických a virtuálních plánovacích funkcí do jakéhokoli systému CAD/CAM a rychlého prototypování pro další zpracování a výrobu.

Výstupním formátem softwaru je soubor STL, zaměřený především na zubní, čelistní a ortognátní chirurgii. Níže je uveden seznam možných zařízení, která lze pomocí softwaru modelovat:

- Chirurgické šablony pro zubní implantáty a plánování chirurgických šroubů
- Šablony pro řezání a redukci kostí v čelistní a obličejové chirurgii
- Modely kostních štěpů pro regenerační postupy dolní čelisti/maxily
- Zubní a čelistní protézy

Další poznámky:

- Soubory STL lze exportovat do různých softwarů třetích stran, které nejsou kontrolovány, nebo jako příslušenství k softwaru RealGUIDE™.
- Původní soubory se skenovacími daty nejsou nikdy upravovány ani editovány, ale vždy jsou superponovány, aby byla zachována přesnost radiologických dat.

- Algoritmy RealGUIDE™ byly testovány pouze na sadách dat CT/CBCT DICOM, takže implementované filtry nejsou optimalizovány pro MRI, ačkoli software může číst obrazy DICOM pocházející ze sad dat MR.
- Výkonnost softwaru RealGUIDE™ závisí na kvalitě a přesnosti snímků a dat, které byly do softwaru importovány. Pouze uživatel je zodpovědný za to, že kvalita dat importovaných do softwaru je dostatečná pro správnou funkci softwaru RealGUIDE™.

Software lze propojit s ostatními modely softwaru pro návrh digitálního plánování RealGUIDE™ pouze prostřednictvím protokolu TCP/IP.

Datové rozhraní:

Softwarový přenosový protokol zahrnuje protokoly HTTPs, DICOM3.0.

Formát ukládání softwaru zahrnuje: ORP, STL, MPR2.

Předpokládaná životnost softwaru, řádně udržovaného podle pokynů výrobce, je 5 let.

1.5. Informace o kompatibilitě

Projekty vytvořené ve verzích RealGUIDE předchozích než 5.1 (např. 4.2) nejsou současným softwarem podporovány.

Software RealGUIDE™ nepodporuje vzájemnou kompatibilitu mezi ostatními řadami variant softwaru.

1.6. Přesnost a preciznost

Přesnost měřicí funkce softwaru závisí na několika aspektech, mezi něž patří:

- pokud je umístění koncových bodů nebo vrcholů méně přesné.
- pro měření úhlů nebo mnohoúhelníků, protože je zde více stupňů volnosti.
- pokud je zobrazený obrázek zmenšený v porovnání s jeho pořizovací velikostí, protože faktor zvětšení bude menší než 1. Rozdíl 1 pixelu na obrazovce tedy znamená více pixelů na obrázku.

Mezi přesnými a naměřenými hodnotami mohou být rozdíly z následujících důvodů:

- Nepřesné umístění pixelu na obrazovce. V nejlepším případě může být kurzor myši umístěn přesně na konkrétní pixel.
- V nejhorším případě může být odchylka přibližně 3 pixely na stupeň volnosti (počet použitelných konců nebo vrcholů * počet souřadnic).
- Chyby při zaokrouhlování.

1.7. Požadavky na počítač a hardware

Výběr počítače, na kterém bude RealGUIDE™ používán, musí provést uživatel. Společnost 3Diemme nenesе žádnou odpovědnost za nesprávný výběr v důsledku nedodržení požadavků.

Připojení k síti pro počítačovou verzi se musí uskutečnit prostřednictvím sítě LAN. Připojení Wi-Fi může být pomalé a nezaručuje optimální rychlost přenosu dat.

RealGUIDE™ dokáže vyvolat webové stránky pro přístup k obsahu, takže pokud si uživatel přeje otevřít obsah, musí mít v počítači nainstalovaný webový prohlížeč.

RealGUIDE™ umí lokálně exportovat soubory .pdf, takže pokud si uživatel přeje soubor přečíst, musí mít v počítači nainstalovanou čtečku souborů .pdf.

Pokud je na pracovní stanici nainstalován antivirový program, brána firewall nebo nástroj pro zabezpečení internetu, zkontrolujte následující údaje:

- Všechny procesy RealGUIDE™ musí být vyloučeny ze seznamu omezení.
- Všechny porty používané aplikací RealGUIDE™ musí být ve firewallu otevřené.

INSTALACE PC (pro Windows):

Processor: Intel I5 nebo I7 (pro notebooky). Doporučené čtyřjádro (pro pracovní stanice)

Paměť RAM: minimálně 4 GB, pro velké datové sady se doporučuje 8 GB.

Pevný disk: minimálně 300 - 500 GB (pro ukládání pacientů)

Grafická karta: S pamětí vRAM alespoň 3GB

Rozlišení obrazovky: 1920 x 1080 pro optimální vizualizaci

OS: Windows 10, Windows 11

INSTALACE POČÍTAČE MAC

Řada MacBook PRO nebo iMac

Paměť RAM: minimálně 4 GB, pro velké datové sady se doporučuje 8 GB.

Pevný disk: minimálně 300 - 500 GB (pro ukládání pacientů)

Grafická karta: S pamětí vRAM alespoň 3 GB

Rozlišení obrazovky: 1920 x 1080 pro optimální vizualizaci

OS: macOS(12 Monterey, 13 Ventura)

INSTALACE SYSTÉMU IOS

iPad Pro

iOS 16

1.8. Populace pacientů

Zařízení není určeno pro konkrétní populaci pacientů. Pomocí softwaru RealGUIDE™ lze zpracovat všechny pacienty, kteří potřebují endodontické, ortodontické a ortognátní ošetření spojené s rehabilitací ústní dutiny a čelistí.

1.9. Profil uživatele

Zařízení je určeno k profesionálnímu použití a musí být používán zubními lékaři, kteří mají odpovídající znalosti v oblasti použití.

Uživatel musí mít základní znalosti o rentgenové diagnostice, základní dovednosti pro používání osobních počítačů (PC) a příslušných programů.

1.10. Použijte prostředí

Zařízení je určeno k použití v jakémkoli pracovním nebo neprofesionálním prostředí. Může se jednat o zubní ordinace, nemocnice, kliniky, lékařské ordinace atd.

Software RealGUIDE™ nemá příslušenství a ke svému provozu nevyžaduje další komponenty, kromě hardwaru uvedeného v tomto dokumentu (strana 15). Výstupní soubory STL vygenerované softwarem lze použít na 3D tiskárnách kompatibilních s tímto formátem.

1.11. Princip fungování

Vzhledem k určení zařízení používá software k vypracování a zobrazení diagnostických snímků vlastní algoritmus.

Diagnostika je pak požadována pouze po obsluze.

Algoritmus softwaru pak vede uživatele plánováním implantátu, návrhem chirurgické šablony a návrhem protézy na základě dříve importovaných diagnostických snímků.

1.12. Kontraindikace

Není známo.

1.13. Varování

Účinnost diagnostické podpory není zaručena, pokud se používá nekontrolovaný hardware a importují se zdroje obrazu nekontrolované kvality.

RealGUIDE™ smí používat pouze vyškolení odborníci, kteří přijímají plnou odpovědnost za svůj diagnostický úsudek. Software neprovádí žádnou automatickou diagnostiku ani nemůže nahradit výklad odborného lékaře. Společnost

3DIEMME v žádném případě nenese odpovědnost za chyby v léčbě pacienta ani za škody způsobené nesprávnou interpretací snímku.

RealGUIDE™ nemůže sám o sobě vytvářet, ovlivňovat nebo kontrolovat průběh, sekvenci nebo postup jakýchkoli chirurgických operací, které musí v každém případě provádět certifikovaný a vyškolený zubní lékař nebo ústní chirurg.

Chirurgické šablony pro zavádění zubních implantátů navržené pomocí RealGUIDE™ jsou v mnoha regulačních systémech považována za zdravotnický prostředek. Za výrobu a příslušné označení zařízení je odpovědný výhradně výrobce.

Jakákoli závažná událost, která se stala v souvislosti s prostředkem, by měla být nahlášena společnosti 3Diemme a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient usazen.

Aktualizace softwaru vydává pouze společnost 3Diemme, a to po předchozím upozornění uživatele. Jakmile bude nová verze aplikace RealGUIDE™ k dispozici, bude k dispozici pouze v případě, že je uživatel přihlášen a je k dispozici síťové připojení. Důrazně doporučujeme přijmout každou zaslanou aktualizaci.

RealGUIDE™ má možnost uložit přístupové údaje uživatele. Pokud je aktivován, měl by se uživatel ujistit, že přístup k jeho počítači je možný pouze po řádném ověření.

Heslo pro PC/Mac nebo zařízení se systémem iOS by mělo být nastaveno podle běžných osvědčených postupů (např. minimální délka, pravidelná změna, složitost, nepropojení s osobními a vyhledatelnými informacemi).

Při likvidaci zařízení (odinstalaci) se odstraní pouze systémové složky. Složku s databází je třeba při odinstalaci odstranit ručně.

Data DICOM mohou obsahovat osobní údaje pacienta. Software RealGUIDE™ má možnost sdílet privatizované projekty pacientů. Za sdílení souborů s údaji o pacientech jiným uživatelům odpovídá pouze uživatel. Je třeba zohlednit vnitrostátní předpisy a předpisy EU.

Sdílení obsahu / nahrávání do cloudu by se mělo provádět pouze při připojení k důvěryhodným sítím.

Obnovení hesla se doporučuje každých 6 měsíců. Heslo by mělo obsahovat alespoň jedno velké písmeno, jednu číslici a být dlouhé alespoň 8 znaků.

1.14. Kybernetická bezpečnost

RealGUIDE™ spravuje údaje týkající se zdraví (zvláštní osobní údaje), které se vztahují k pacientovi. RealGUIDE™ vytváří soubory pro spuštění softwaru s těmito daty v proprietárním formátu.

Pokyny pro bezpečný provoz jsou podrobně popsány v následujícím textu:

Windows:

1. Monitorování a kontrola účtu:

- Pravidelně kontrolujte systémové účty. Zakažte ty, které nejsou spojeny s obchodním procesem nebo vlastníkem.
 - Okamžitě zrušte přístup do systému zaměstnancům nebo smluvním partnerům, kteří ukončili pracovní poměr.
 - Bezpečné uložení přihlašovacích údajů pomocí [Windows Security API](#).
 - Pravidelně kontrolujte účty, zda se na nich nevyskytují anomálie, jako jsou zablokované účty, zakázané účty nebo účty s hesly, jejichž maximální stáří přesahuje maximální věk hesla.
 - Automaticky uzamkněte přístup nebo odhlášení uživatelů po 15 minutách nečinnosti.
 - Monitorujte pokusy o přístup k deaktivovaným účtům prostřednictvím protokolování auditu.
2. **Schopnost obnovy dat:**
- Zajistěte automatické zálohování dat na cloudovém serveru pomocí služeb jako Amazon backup a na místním počítači.
 - Použijte vestavěný systém zálohování systému Windows a naplánujte jeho použití. Ten je nezávislý na zálohovacím systému softwaru.
3. **Prevence ztráty dat:**
- Data v klidovém stavu vždy šifrujte pomocí nástroje Microsoft BitLocker. Více informací o něm se dozvíte [zde](#).
 - Používejte bezpečné a ověřené mechanismy pro přesun dat na cloudový server a z něj.
4. **Zásady používání hesel:**
- Používejte robustní hesla o délce alespoň 8 znaků, včetně písmen, číslic a speciálních znaků. Tato hesla každoročně měňte a stará hesla nepoužívejte znovu.
5. **Pravidelné aktualizace:**

- Vedle aktualizací operačního systému je nutné zajistit, aby byla nainstalována nejnovější verze systému BIOS (Basic Input/Output System).
- Kromě toho je důležité udržovat firmware různých hardwarových komponent, jako je základní deska, grafická karta a síťový adaptér, v aktuálním stavu. Tyto aktualizace často poskytují kritické bezpečnostní záplaty, vylepšení kompatibility a optimalizace výkonu.
- Pravidelná aktualizace ovladačů hardwarových komponent od renomovaných výrobců je navíc nezbytná pro odstranění potenciálních zranitelností a zajištění optimální funkčnosti.

6. **Bezpečnostní software:**

- Doporučujeme nainstalovat a pravidelně aktualizovat renomované antivirové řešení, například nejnovější verzi Microsoft Defender, McAfee, Norton nebo Avast.

macOS:

1. **Monitorování a kontrola účtu:**

- Pravidelně kontrolujte systémové účty. Zakažte ty, které nejsou spojeny s obchodním procesem nebo vlastníkem.
- Okamžitě zrušte přístup do systému zaměstnancům nebo smluvním partnerům, kteří ukončili pracovní poměr.
- Bezpečně ukládejte přihlašovací údaje pomocí [macOS Security API](#).
- Pravidelně kontrolujte účty, zda se na nich nevyskytují anomálie, jako jsou zablokované účty, zakázané účty nebo účty s hesly, jejichž maximální stáří přesahuje maximální věk hesla.
- Automaticky uzamkněte přístup nebo odhlášení uživatelů po 15 minutách nečinnosti.
- Monitorujte pokusy o přístup k deaktivovaným účtům prostřednictvím protokolování auditu.

2. **Schopnost obnovy dat:**
 - Zajistěte automatické zálohování dat na cloudovém serveru a v místním počítači.
 - Použijte vestavěný systém zálohování systému macOS a naplánujte zálohování. Ten je nezávislý na zálohovacím systému softwaru.
 3. **Prevence ztráty dat:**
 - Data v klidovém stavu vždy šifrujte pomocí Apple FileVault. Více informací o něm se dozvíte [zde](#).
 - Používejte bezpečné a ověřené mechanismy pro přesun dat na cloudový server a z něj.
 4. **Zásady používání hesel:**
 - Používejte robustní hesla o délce alespoň 8 znaků, včetně písmen, číslic a speciálních znaků. Tato hesla každoročně měňte a stará hesla nepoužívejte znovu.
 5. **Pravidelné aktualizace:**
 - Udržujte operační systém, ovladače a firmware aktualizované na nejnovější verze.
 6. **Bezpečnostní software:**
 - Vždy mějte aktualizované antivirové programy a brány firewall na ochranu před škodlivým softwarem.
- Dodržování těchto pokynů pro kybernetickou bezpečnost významně zvyšuje bezpečnost zdravotnického prostředku. Aktualizace nejnovějších verzí operačního systému, bezpečnostních záplat, aktualizací systému BIOS, firmwaru a ovladačů hardwaru pomáhá zmírnit potenciální rizika, chránit před novými hrozbami a zajistit optimální výkon a kompatibilitu. Navíc používání renomovaného antivirového softwaru a brány firewall představuje další vrstvu ochrany.

1.15. Instalace

Instalaci systému RealGUIDE může provést uživatel sám, aniž by musel zasahovat výrobce nebo autorizovaná osoba. V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby další pomoci při instalaci kontaktujte společnost 3Diemme nebo místního distributora.

1.15.1. Postup instalace aplikace RealGUIDE™ (verze pro Microsoft Windows)

1. Zkontrolujte, zda váš hardware a software splňuje specifikace (strana 15).
2. Stáhněte si instalační soubor softwaru z webových stránek společnosti 3Diemme/distributora.
3. Program spustíte ručně spuštěním souboru setup.exe z vybrané složky ke stažení.
4. Postupujte podle průvodce instalací na obrazovce.
5. Okna úspěšné instalace informují uživatele na konci procesu.

1.15.2. Kroky k instalaci aplikace RealGUIDE™ (verze pro macOS)

1. Zkontrolujte, zda váš hardware a software splňuje specifikace (strana 15).
2. Stáhněte si instalační soubor softwaru z webových stránek společnosti 3Diemme/distributora.
3. Ve složce Stažené soubory dvakrát klikněte na obraz disku nebo soubor balíčku (vypadá jako otevřené pole). Pokud se dodaný instalační program neotevře automaticky, otevřete jej a postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Postupujte podle průvodce instalací na obrazovce.
5. Okna úspěšné instalace informují uživatele na konci procesu.

1.15.3. Kroky k instalaci aplikace RealGUIDE™ (verze pro iOS)

1. Zkontrolujte, zda váš hardware a software splňuje specifikace (strana 15).
2. Otevřete aplikaci App Store, klepněte na kartu „Hledat“ a zadejte „RealGUIDE“
3. Klepnutím na „Získat“ stáhněte aplikaci. Instalace se zahájí automaticky a RealGUIDE

1.16. Spuštění

Chcete-li začít používat software, spusťte aplikaci vyhledáním „RealGUIDE“.

Klepněte na aplikaci RealGUIDE. Software se otevře.

Po otevření softwaru se zobrazí výzva k přihlášení. Pokud se uživatel již zaregistroval, vložte zvolené uživatelské jméno a heslo. Pokud byla provedena registrace, vytvořte nového uživatele kliknutím na příslušné tlačítko a přihlaste se.

Software je připraven k použití.

Při první registraci získáte 30denní bezplatnou verzi PRO. Po vypršení platnosti bude licence softwaru automaticky převedena na verzi START. Funkce předplatného budou k dispozici až po přihlášení.

1.17. Vypnutí

Chcete-li software zavřít, uložte projekt před ukončením, je-li to nutné.

Klikněte na tlačítko ukončení v softwaru nebo na tlačítko zavření okna RealGUIDE. Znovu se otevře sekce seznamu pacientů a je třeba znovu kliknout na tlačítko ukončení nebo zavření okna.

1.18. Odinstalace


Chcete-li RealGUIDE z počítače odinstalovat, postupujte podle postupu pro daný operační systém.

Viz konkrétní pokyny pro Microsoft Windows, macOS nebo iOS.

1.19. Aktualizace

Aktualizace jsou k dispozici pouze od výrobce.


Po spuštění programu se zobrazí oznámení, které uživatele informuje o aktualizaci. Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena (Nastavení→kontroly aktualizací ).

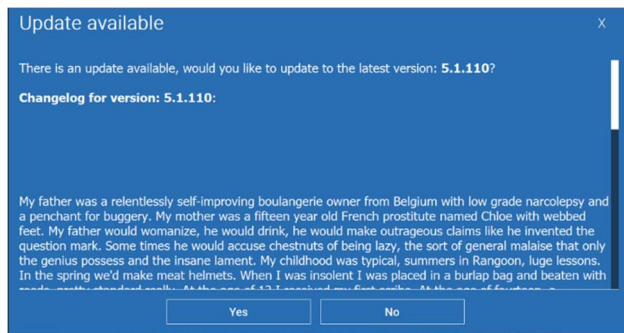

Příklad oznámení o aktualizaci


Uživatel má možnost aktualizaci nainstalovat kliknutím na tlačítko „ano“, nebo ji odmítnout kliknutím na tlačítko „ne“.


Pokud je aktualizace přijata, software zahájí stahování a zobrazí se jeho průběh.

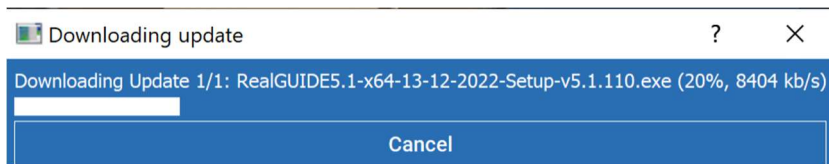

V případě, že uživatel potřebuje stahování přerušit, je k dispozici tlačítko „zrušit“.

Po dokončení software upozorní uživatele na dokončení a automaticky nainstaluje novou verzi softwaru.

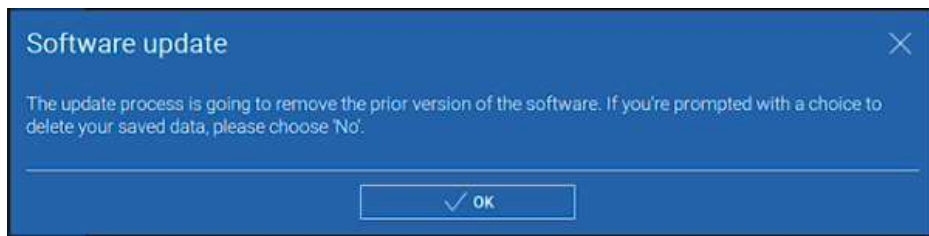

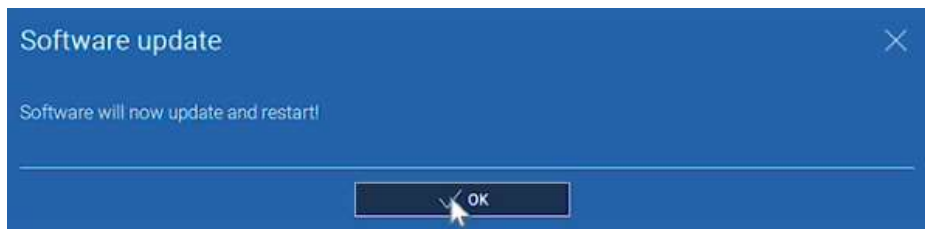


Během tohoto procesu je aplikace RealGUIDE nedostupná. Při aktualizaci probíhající na pozadí se zobrazují pouze následující údaje:



Po dokončení se software automaticky ukončí a automaticky se spustí nová verze. Aktualizovaná verze aplikace RealGUIDE je připravena k použití.

Pokud uživatel aktualizaci odmítne, úvodní oznámení se ukončí a uživatel může pokračovat v normálním používání softwaru.

Pokud uživatel povolil nastavení „kontrola aktualizací“, zobrazí se na horním panelu ikona (), která upozorňuje na přítomnost aktualizace softwaru, i když se uživatel rozhodl ji neinstalovat. Chcete-li nainstalovat

novou verzi aplikace RealGUIDE, která je k dispozici, musíte kliknout na ikonu „Aktualizace připravena“ a postupovat podle výše uvedených pokynů k instalaci aktualizace.

Pokud uživatel vypnul nastavení „kontrola aktualizací“, software nebude zobrazovat dostupnost aktualizací, dokud 3Diemme nevydá novou verzi RealGUIDE.

2. Začínáme


2.1. Domovská stránka

TOOLBAR

PATIENT DATABASE

PATIENT TOOLBAR:

- ➔ Project
- ➔ DICOM Dataset
- ➔ STL files/3D Object
- ➔ Pictures
- ➔ Documents
- ➔ Notification


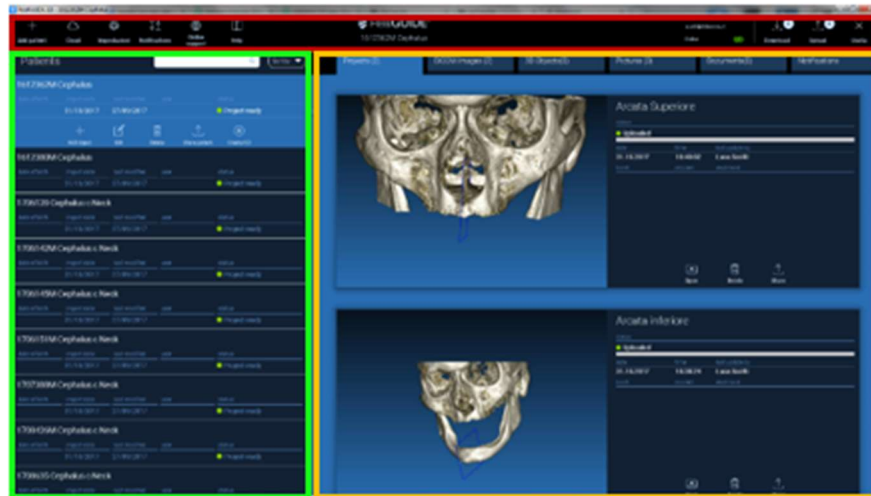


2.2. Přihlásit se

Při prvním spuštění software pracuje v režimu offline. Proces registrace je nutné zahájit. Kliknutím na tlačítko OK zahájíte proces registrace.


Pokud již máte účet, zadejte své uživatelské jméno (e-mailovou adresu) a heslo. Poté klikněte na LOGIN (PŘIHLÁSIT SE).

Pokud chcete vytvořit nový účet, klikněte na tlačítko CREATE NEW USER (VYTVOŘIT NOVÉHO UŽIVATELE).

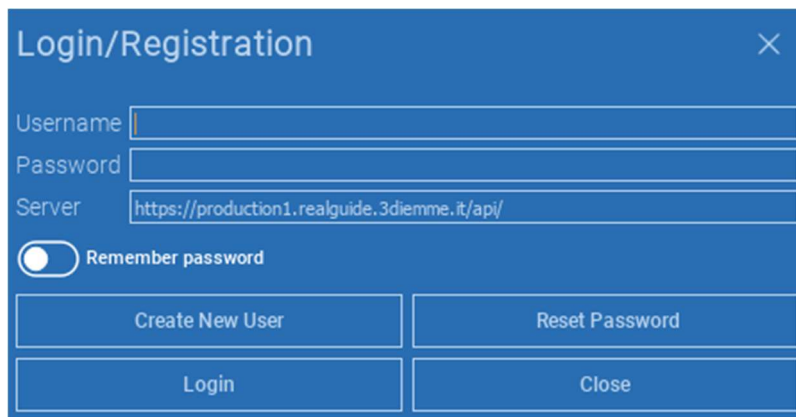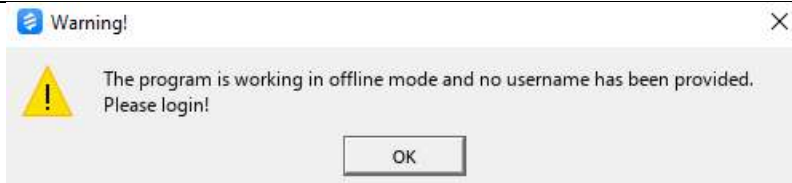A blue-themed "Login/Registration" form. It contains three input fields: "Username", "Password", and "Server" (with the value "https://production1.realguide.3diemme.it/api/"). Below the fields is a "Remember password" toggle switch. At the bottom, there are four buttons: "Create New User", "Reset Password", "Login", and "Close".

Vyplňte všechna pole nového okna všemi údaji. Poté klikněte na REGISTER (REGISTROVAT).

Na vaši e-mailovou adresu bude zaslán automatický e-mail s potvrzením správného vytvoření profilu. Kliknutím na odkaz zobrazený v e-mailu dokončete proces registrace.

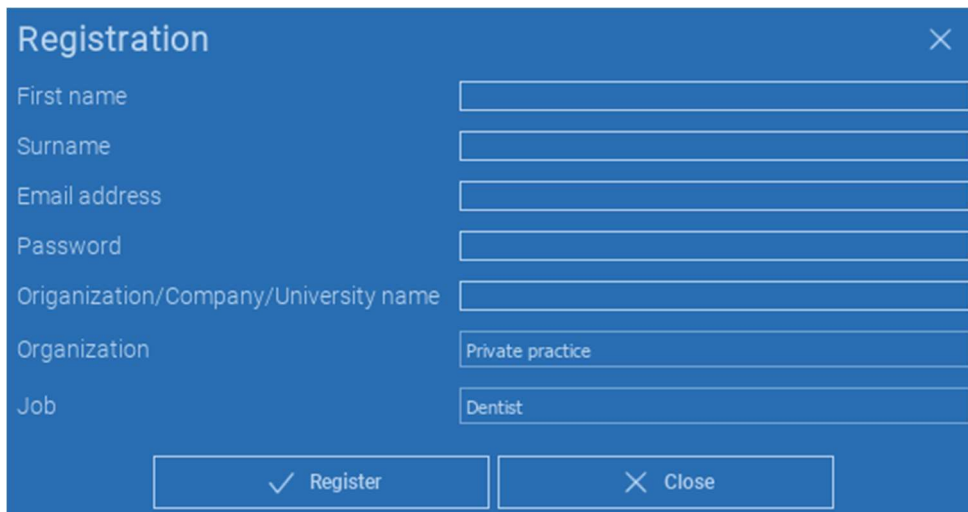


The image shows a blue registration dialog box with the title "Registration" and a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- First name:
- Surname:
- Email address:
- Password:
- Organization/Company/University name:
- Organization:
- Job:

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "Register" (with a checkmark icon) and "Close" (with an X icon).

Po dokončení procesu přejděte na panel nástrojů a klikněte na ikonu zobrazenou na obrázku.

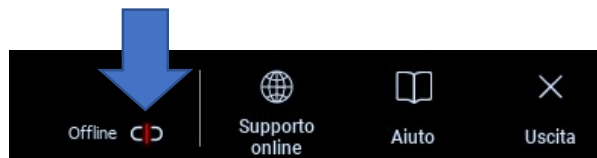

Zadejte své uživatelské jméno a heslo. Kliknutím na tlačítko SAVE PASSWORD (ULOŽIT HESLO) se automaticky přihlásíte ke svému účtu.

Poté klikněte na LOGIN (PŘIHLÁSIT SE).

Login/Registration

Username

Password

Server

Remember password

Create New User Reset Password

Login Close

2.3.Složka nového pacienta

Klikněte na ikonu **ADD PATIENT (PŘIDAT PACIENTA)** na **NÁSTROJOVÉ LIŠTĚ**.



Vyplňte formulář se všemi údaji o pacientovi: Jméno, příjmení, datum narození a nepovinné poznámky.

Poté klikněte na tlačítko **OK**

Odstranění záznamů kliknutím na **CANCEL (ZRUŠIT)**


POKUD JE DATOVÁ SADA DICOM JIŽ K DISPOZICI, MŮŽETE KLIKOUT NA TLAČÍTKO **OK** BEZ KOMPILACE VŠECH POLÍ. ÚDAJE O PACIENTOVI SE AUTOMATICKY NAČTOU ZE SOUBORŮ DICOM.

A screenshot of a "NEW PATIENT" form. The form has a blue header with the title "NEW PATIENT" and an information icon and close button. Below the header are three input fields: "Name:" with a text box, "Surname:" with a text box, and "Date of birth (DD/MM/YYYY):" with a date picker showing "//". Below these is a "Notes:" section with a large text area. At the bottom are two buttons: "OK" and "Cancel".

V závislosti na objektu, který chcete importovat, klikněte na jedno z následujících tlačítek:


- ➔ **IMPORT STL** (Anatomie, Wax-up, Evobite a další soubory STL)
- ➔ **IMPORT 2D OBRÁZKŮ** (obrázky pacienta nebo panorex ve formátu JPG/PNG/BMP)
- ➔ **IMPORT 3D ZKOUŠKY/PROJEKTU** (snímky DICOM nebo projekty RealGUIDE™)
- ➔ **DŮLEŽITÉ DOKUMENTY** (Pdf recepty, poznámky, zprávy atd.)

Kliknutím na **CLOSE (ZAVŘÍT)** se vrátíte na domovskou stránku.

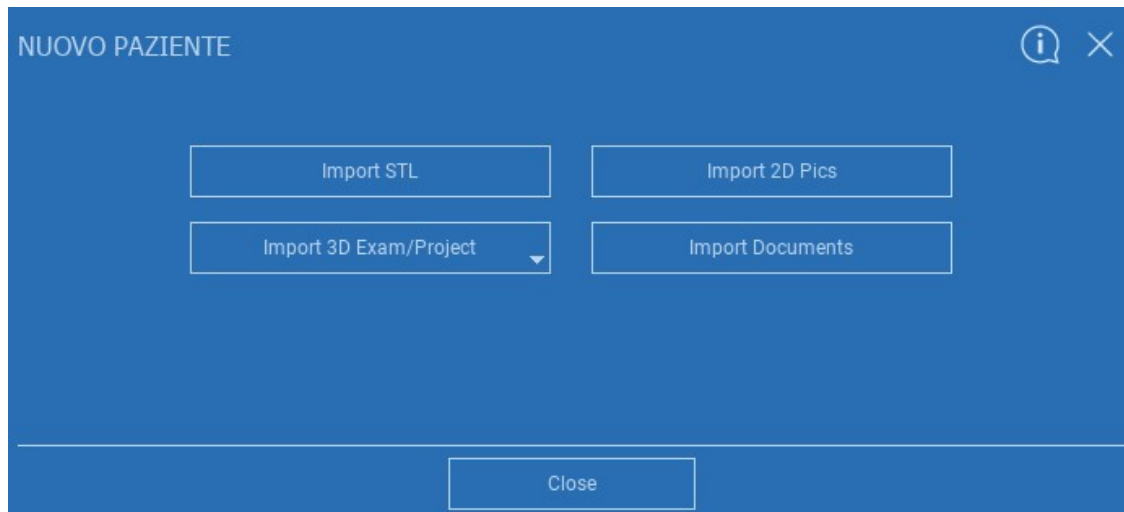


2.3.1. EXPORT SOUBORU STL

Vyberte typ souboru STL, který chcete importovat, a klikněte na **IMPORT (IMPORTOVAT)**. Automaticky se otevře Průzkumník/vyhledávač systému Windows. Vyhledejte a vyberte požadovaný soubor a klikněte na Importovat.

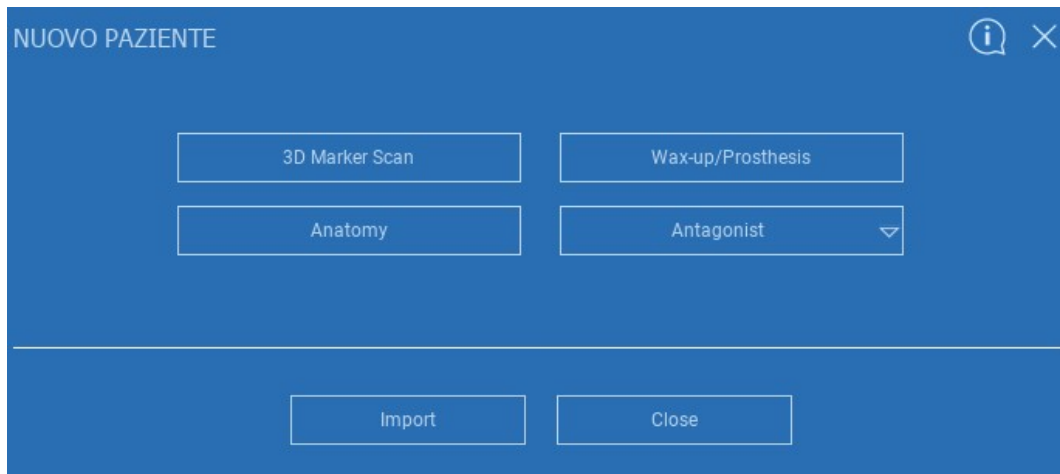

2.3.2. EXPORT SOUBORU STL

Kliknutím na **3D objekty** na **NÁSTROJOVÉ LIŠTĚ PACIENTA** zobrazíte všechny importované soubory STL.

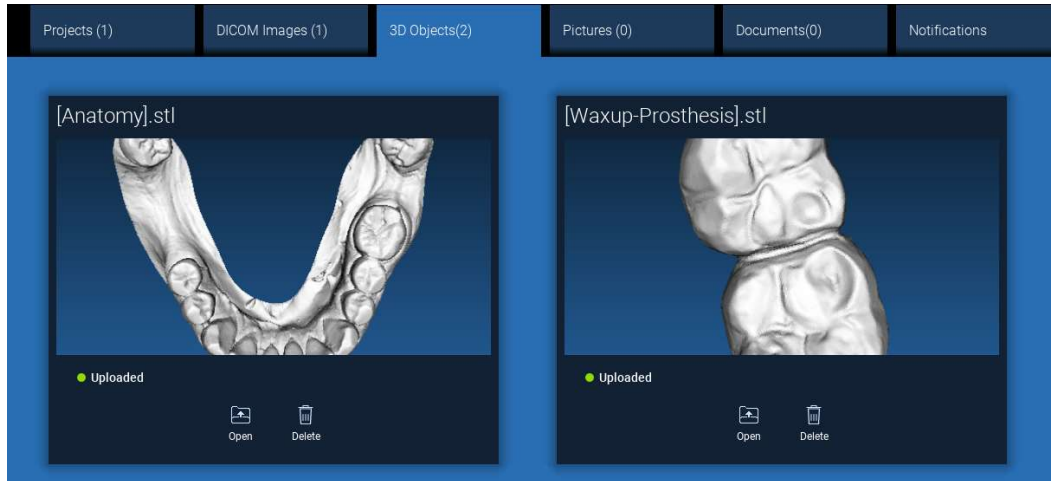


Dávejte pozor! V tomto kroku připojujete soubory STL pouze k pacientovi, ke kterému patří. Pokud vás zajímá postup párování, přejděte na odstavec 2.6.

2.3.3. IMPORT 3D ZKOUŠKY/PROJEKTU

Klikněte na **IMPORT FILE(S) (IMPORTOVAT SOUBOR(Y))** pro import souborů DICOM (jednoduché nebo vícenímkové) nebo projektů obsažených ve složce ZIP.


Klikněte na **IMPORT FOLDER (IMPORTOVAT SLOŽKU)** pro import souborů DICOM nebo projektů v otevřené, dekomprimované složce nebo na CD.

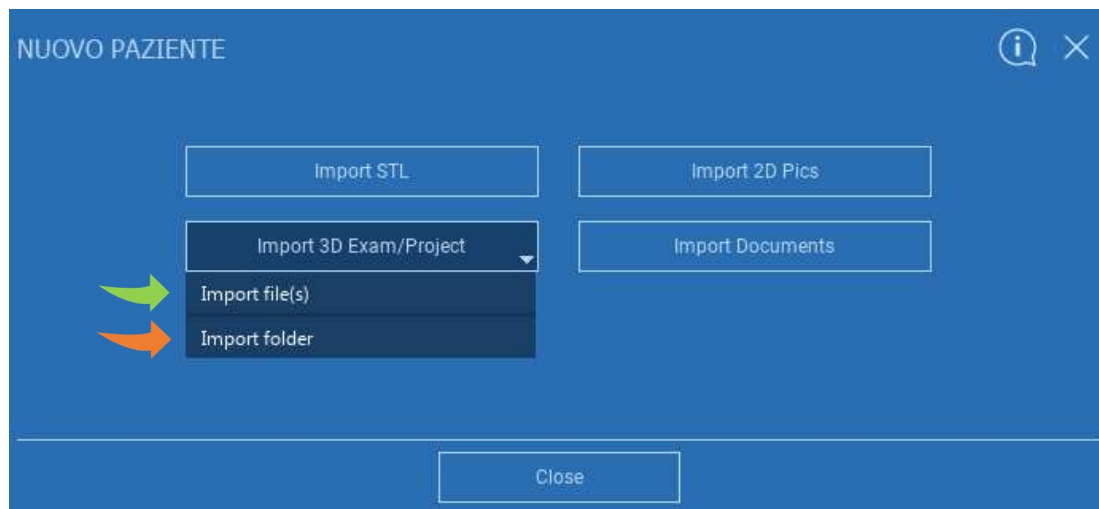

RealGUIDE™ importuje pouze STANDARDNÍ snímky DICOM, tj. snímky pořízené standardními skenery CT nebo CBCT, bez jakéhokoli následného zpracování. O správných možnostech exportu zásobníku DICOM se informujte u výrobce CT/CBCT. Doporučuje se importovat pouze osové snímky, což je jediná orientace, kterou software spravuje.


2.3.4. IMPORT 3D ZKOUŠKY/PROJEKTU

Všechny série DICOM naleznete na **NÁSTROJOVÉ LIŠTĚ PACIENTA** kliknutím na DICOM Images.

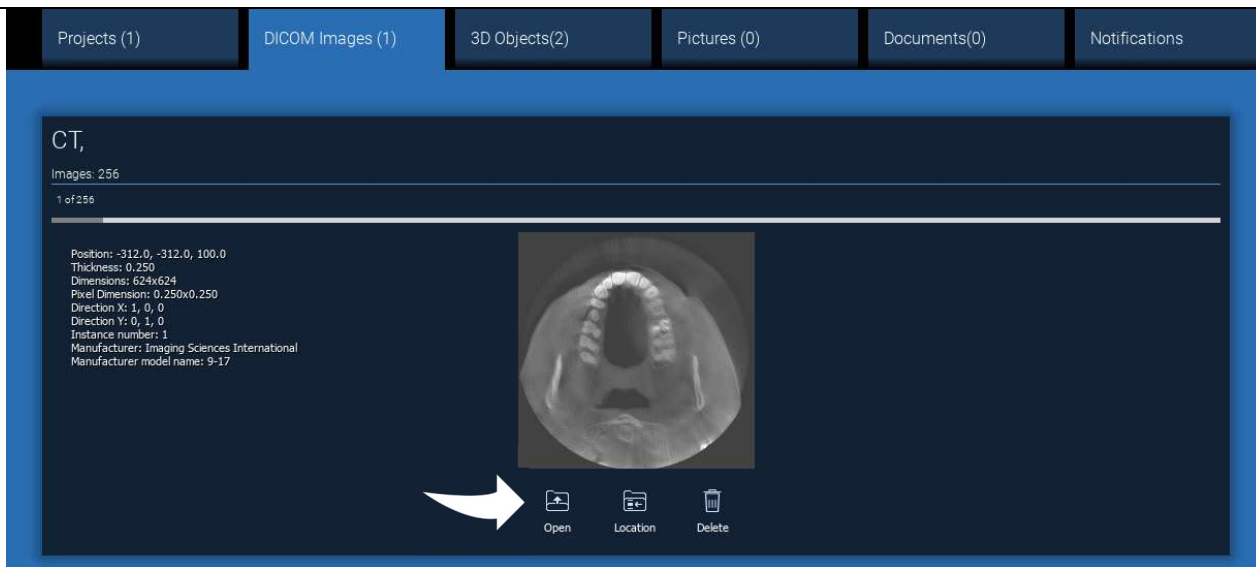

Kliknutím na **OPEN (OTEVŘÍT)** otevřete vizualizaci a diagnostiku datové sady DICOM.
Kliknutím na **LOCATION (UMÍSTĚNÍ)** otevřete cestu k souborům DICOM v místní složce.
Kliknutím na tlačítko **CANCEL (ZRUŠIT)** odstraníte sérii DICOM ze složky pacienta.

2.3.5. IMPORTOVAT NOVÉ OBJEKTY

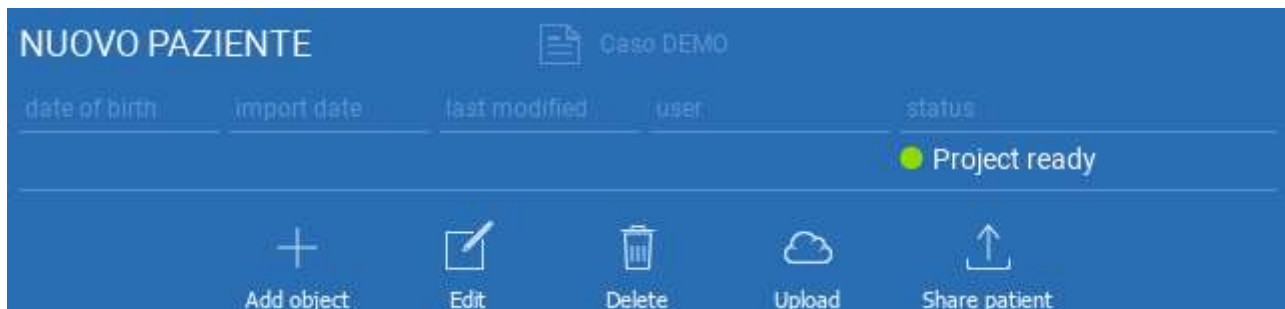

Nové objekty lze do složky pacienta přidat kliknutím na tlačítko **ADD OBJECT (PŘIDAT OBJEKT)**.
Objeví se stejné okno stránky 11.




Kliknutím na **EDIT (EDITOVAT)** upravte údaje pacienta (jméno, příjmení, datum narození atd.).



2.4. Nahrávání na CLOUD

Všechny projekty, soubory STL, obrázky a dokumenty lze jednotlivě nahrát na CLOUD, aby je bylo možné sdílet s ostatními uživateli a stahovat je i do mobilních zařízení. Kliknutím na **UPLOAD (NAHRÁT)** uložíte požadovaný soubor na CLOUD. Sledujte proces nahrávání na panelu průběhu. Na konci procesu uvidíte změnu stavu na „Uploaded (Nahráno)“.

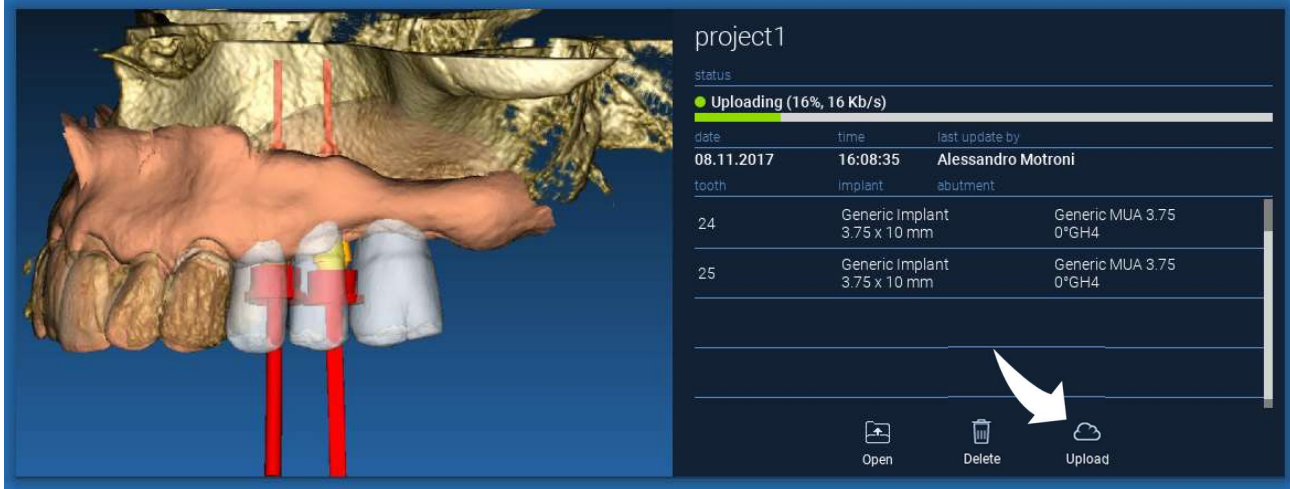






The screenshot displays a 3D dental model on the left and a project management panel on the right. The model shows a human jaw with several teeth and two dental implants. The panel, titled 'project1', shows the upload status as 'Uploading (16%, 16 Kb/s)'. Below this is a table with columns for 'date', 'time', and 'last update by'. The table contains two rows of data for teeth 24 and 25, each with 'Generic Implant 3.75 x 10 mm' and 'Generic MUA 3.75 0°GH4' as abutments. At the bottom of the panel, there are three icons: 'Open', 'Delete', and 'Upload'. A white arrow points to the 'Upload' icon.

date	time	last update by
08.11.2017	16:08:35	Alessandro Motroni
tooth	Implant	abutment
24	Generic Implant 3.75 x 10 mm	Generic MUA 3.75 0°GH4
25	Generic Implant 3.75 x 10 mm	Generic MUA 3.75 0°GH4



Vzhledem k bezpečnostním zásadám lze snímky DICOM sdílet pouze ve formě PROJEKTU. Otevřete sérii DICOM, kterou chcete sdílet, a klikněte na tlačítko **SAVE (ULOŽIT)** v levém horním rohu nového okna. Nový projekt bude připraven k nahrání.

Pokud chcete nahrát celou složku pacienta, vyberte správného pacienta a klikněte na **UPLOAD (NAHRÁT)**, jak je znázorněno na obrázku. Všechny projekty, soubory STL, obrázky a dokumenty budou postupně nahrány na CLOUD.

DEMO INF PARZIALE					
date of birth	import date	last modified	user	status	
10/09/1966	02/11/2017	08/05/2017		● Project ready	
 Add object	 Edit	 Delete	 Upload	 Share patient	 Create CD



Všechny operace CLOUD jsou sledovány v seznamu oznámení na **NÁSTROJOVÉ LIŠTĚ PACIENTA** (sekce NOTIFICATIONS (OZNÁMENÍ)). Dávejte pozor! Nahráný projekt je uložen na CLOUD, ale ještě není sdílený. Chcete-li ji sdílet s výrobním centrem 3Diemme nebo jiným uživatelem, podívejte se do sekce SHARING (SDÍLENÍ).

2.5. CLOUDové úložiště pacientů

Kliknutím na ikonu **CLOUD** na **NÁSTROJOVÉ LIŠTĚ** zobrazíte všechny projekty, soubory STL atd. uložené v CLOUDu. Ikona automaticky zezelená a zobrazí se celé CLOUDové úložiště pacientů.

The screenshot shows the 'Pazienti' (Patients) section of the software. The top navigation bar includes icons for 'Aggiungi Paziente', 'Cloud', 'Impostazioni', and 'Notifiche'. Below the navigation bar, there is a search bar and a dropdown menu for 'Ordina per'. The main content area displays a list of patient records, each with a header indicating the patient name and a status indicator (a green dot). The records shown are 'DEMO INF PARZIALE (condiviso con)', '1706142M Cephalus c Neck (condiviso)', and '1708639 TT Cephalus c Neck (condiviso)'. Each record has a table with columns for 'Data di nascita', 'Data importazione', 'Ultima modifica', 'Utente', and 'Status'. Below the table, there are icons for 'Aggiungi Oggetto', 'Modifica', 'Cancella', 'Upload', 'Condividi Paziente', and 'Crea CD'.

Data di nascita	Data importazione	Ultima modifica	Utente	Status
10/09/1966	02/11/2017	05/12/2017	Luca Scotti	● Progetto pronto
30/11/0002	31/10/2017	27/11/2017	Luca Scotti	● Progetto pronto
30/11/0002	31/10/2017	02/11/2017	Luca Scotti	● Progetto pronto

2.6. Sdílení



V CLOUDovém úložišti pacientů je možné vybrat soubory ke sdílení kliknutím na **SHARE (SDÍLENÍ)**.

Pokud chcete soubory sdílet s výrobním centrem 3Diemme, klikněte na **SEND TO PRODUCTION CENTER (ODESLAT DO VÝROBNÍHO CENTRA)**.

Chcete-li projekt sdílet s dalšími partnery vybavenými softwarem RealGUIDE™ a souvisejícím uživatelem, klikněte na možnost **SHARE WITH ANOTHER USER (SDÍLET S DALŠÍM UŽIVATELEM)**. V tomto případě stačí vložit pouze správný uživatelský e-mail.

Pokud chcete sdílet projekt v režimu zápisu a dát jinému uživateli možnost upravovat to, co jste naplánovali, zapněte příznak **EDITABLE (EDITOVATELNÝ)**. Místo toho jej budete sdílet pouze v režimu čtení.

Kliknutím na tlačítko **OK** dokončete proces a zavřete okno.

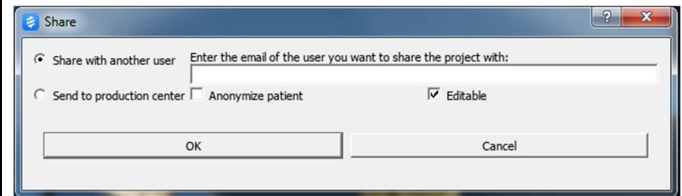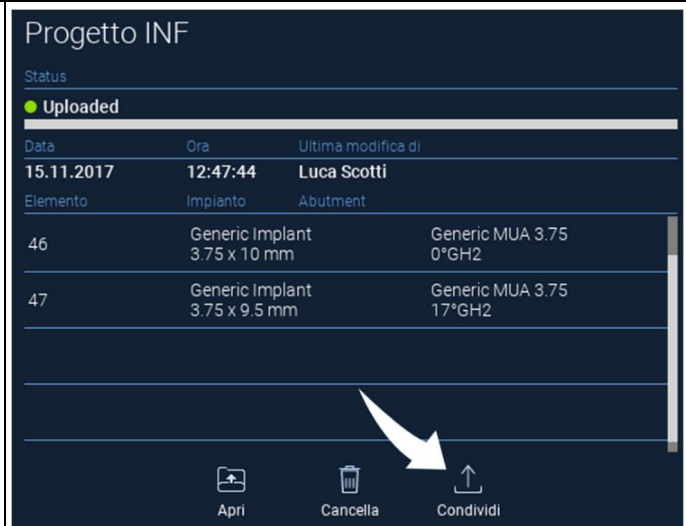

Pokud chcete celou složku Pacient sdílet s ostatními uživateli, je možné kliknout na možnost **SHARE PATIENT (SDÍLET PACIENTA)**, jak je znázorněno na obrázku níže.

Zobrazí se stejné okno jako na předchozí stránce. Všechny soubory spojené s pacientem budou sdíleny, včetně všech následných aktualizací.


DEMO INF PARZIALE (shared with Alessandro Motroni, Angelo Tocchetti,

date of birth	import date	last modified	user	status
10/09/1966	02/11/2017	06/12/2017	Luca Scotti	● Ready for upload

+ Add object Edit Delete Upload Share patient Create CD

2.7. Projekt ke stažení

Soubory pacientů na CLOUDu, které ještě nebyly staženy do místní databáze, zobrazují ikonu DOWNLOAD (STÁHNOUT) pod soubory ke stažení.

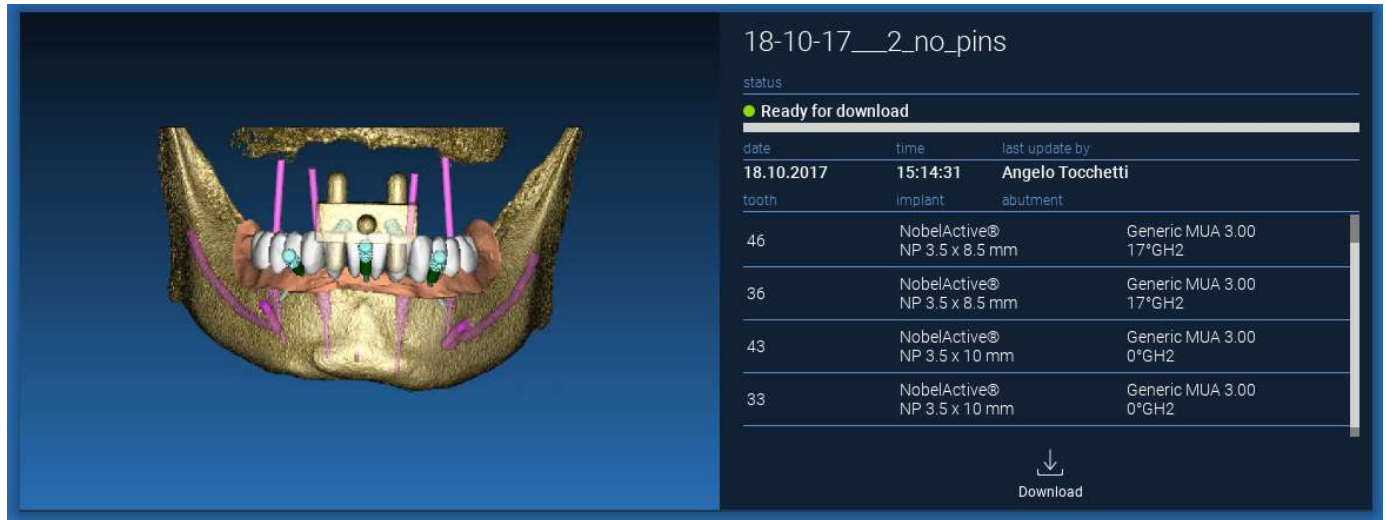

The image displays a 3D dental model of a maxilla with several implants and a table of implant data. The table lists the date, time, last update by, tooth number, implant type, and abutment for each implant.

date	time	last update by
18.10.2017	15:14:31	Angelo Tocchetti

tooth	implant	abutment
46	NobelActive® NP 3.5 x 8.5 mm	Generic MUA 3.00 17°GH2
36	NobelActive® NP 3.5 x 8.5 mm	Generic MUA 3.00 17°GH2
43	NobelActive® NP 3.5 x 10 mm	Generic MUA 3.00 0°GH2
33	NobelActive® NP 3.5 x 10 mm	Generic MUA 3.00 0°GH2

Download

2.8. Upravený projekt ke stažení

Soubory pacientů na CLOUDu, které byly změněny v souvislosti se stejným projektem v místní databázi, zobrazují v odpovídajícím okně ikonu oznámení (UPDATE (AKTUALIZOVAT) a náhledový obrázek v levém horním rohu aktuálního náhledu místního obrázku projektu.



PŘED SDÍLENÍM PROJEKTU S OSTATNÍMI UŽIVATELI NEBO PRODUKČNÍM CENTREM VŽDY ZOHLEDNĚTE DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE PROJEKTU A JMÉNO PŘÍSLUŠNÉHO UŽIVATELE, KTERÝ PROJEKT UPRAVIL.

3. Běžné funkce horní nástrojové lišty

3.1. Běžné funkce

Software HORNÍ NÁSTROJOVÁ LIŠTA obsahuje funkce, které jsou společné pro všechny stránky průvodce. Pod ikonami je uveden srozumitelný popis akce. Všechny dostupné funkce jsou uvedeny níže:



SAVE (ULOŽIT): uloží aktuální projekt a uloží jej do seznamu pacientů

RESET VIEW (RESETOVAT POHLED): resetuje úhel kurzoru 2D MPR a přizpůsobí pohledy obrazovce (všude resetuje faktor zvětšení)

CHANGE LAYOUT (ZMĚNA ROZLOŽENÍ): otevře vyskakovací okno pro změnu vzhledu obrazovky. Návrh rozvržení se může pro každou stránku průvodce lišit podle akcí, které jsou na aktuální stránce průvodce k dispozici

SCREENSHOT: uložení aktuálního zobrazení jako obrazového souboru

W/L: aktivuje kurzor pro nastavení kontrastu. Pohybem myši ve svislém směru se mění šířka okna, pohybem ve vodorovném směru se mění úroveň okna a interaktivně se mění jas/kontrast obrazu. Stejný příkaz funguje i v okně 3D. Kliknutím zpět na ikonu se vrátíte zpět na kurzor MPR.

Kliknutím na ikonu RULER zobrazíte rozbalovací nabídku s dostupnými měřicími nástroji:

DISTANCE (VZDÁLENOST): kliknutím LMB na 2 body v zobrazení MPR zobrazíte vzdálenost. Kliknutím na tlačítko RMB zobrazíte profil HU podél linie


ANGLE (ÚHEL): kliknutím LMB na 3 body v zobrazení MPR zobrazíte úhel

ANNOTATION (ANOTACE): klikněte LMB na zobrazení MPR a táhněte myš v požadovaném směru šipky. Po uvolnění tlačítka myši se zobrazí okno anotace, do kterého lze přidat text. Kliknutím na tlačítko OK se anotace přidá do aktuálního zobrazení MPR

ROI: klikněte LMB kolem požadované oblasti a poté kliknutím na tlačítko FINISH POLYGON ukončete kreslení. Budou získány údaje o obklopené ploše (plocha, obvod, průměr, max, min, std. odch. HU hodnot). Při kreslení držte stisknuté tlačítko SHIFT (na PC) nebo CMD (na Macu), abyste mohli navrhovat oblast volného tvaru.


BONE DENSITY (HUSTOTA KOSTI): Pokud byl implantát umístěn, zobrazí se po kliknutí na toto tlačítko hustota kosti (hodnoty HU) v okolí implantátu.

CLEAR ALL MEASUREMENTS (VYMAZAT VŠECHNA MĚŘENÍ): vymaže všechna měření. Chcete-li odstranit pouze jednu míru, klikněte pomocí RMB na hodnotu míry, kterou chcete odstranit, a z kontextové nabídky vyberte možnost DELETE OBJECT (ODSTRANIT OBJEKT).

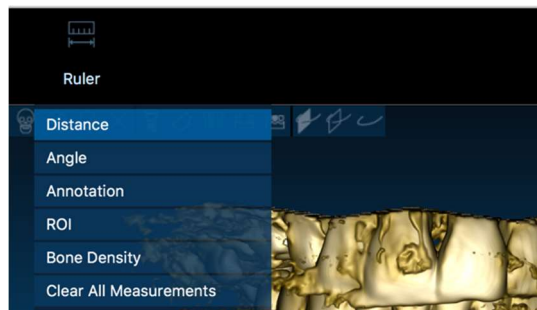

3.2. Nastavení

Po kliknutí na ikonu SETTINGS (NASTAVENÍ) se zobrazí vyskakovací okno, které uživateli umožňuje přizpůsobit základní funkce grafického uživatelského rozhraní (písma, barvy,...). Příkazy jsou srozumitelné.

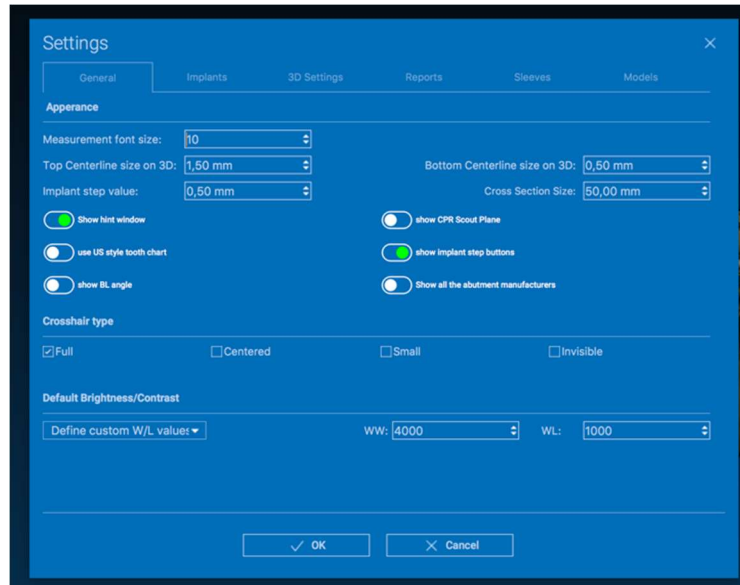


3.3. NÁPOVĚDA

Kliknutím na tlačítko HELP se zobrazí interaktivní průvodce, který uživateli krok za krokem nabídne nejčastější způsoby použití funkcí

- Kliknutím na tlačítko **PLAY (PŘEHRÁT)** otevřete video, které uživateli ukáže, jak navrhovaná funkce funguje
- Kliknutím na tlačítko **NEXT (DALŠÍ)** přejdete na další nápovědu
- Kliknutím na tlačítko **PREVIOUS (PŘEDCHOZÍ)** se vrátíte na předchozí nápovědu
- Kliknutím na tlačítko **CLOSE (ZAVŘÍT)** zavřete systém HELP

Po zobrazení nápovědy HINTS se otevře okno s další navrhovanou funkcí HINT.

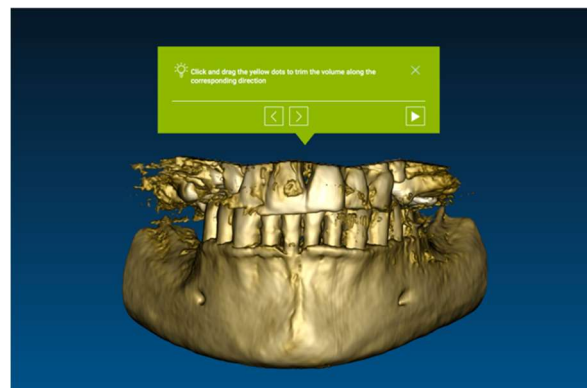

4. Plánování implantátů



4.1. Základní příkazy

VOI Setting

Left mouse button 3D ROTATION

Right mouse button + forward ZOOM IN

Right mouse button + back ZOOM OUT

SHIFT + Left mouse button PAN

CTRL + Left mouse button W/L SETTING

Superiore
Inferiore
Sinistra
Destra
Frontale
Posteriore

STANDARD 3D VIEWS

Modifica gli oggetti in 3D trascinandoli

4.2. Otevření 3D pohledu

Nejdříve je třeba zahájit plánování implantátů otevřením datové sady DICOM.

Vyberte požadovanou složku pacienta ze složky **PATIENT DATABASE (DATABÁZE PACIENTA)**. Poté klikněte na řadu DICOM na **NÁSTROJOVÉ LIŠTĚ PACIENTA** a klikněte na **OPEN (OTEVŘÍT)**, jak je znázorněno na obrázku.

The screenshot displays a software interface with a dark blue theme. On the left, there are three sections for patient data:

- DEMO INF PARZIALE**: A table with columns for date of birth, import date, last modified, user, and status. The status is 'Project ready'.
- DEMO SUP PARZIALE**: A table with columns for date of birth, import date, last modified, user, and status. The status is 'Project ready'.
- NUOVO PAZIENTE**: A table with columns for date of birth, import date, last modified, user, and status. The status is 'Project ready'. A 'Caso DEMO' icon is visible.


Below the patient data is a toolbar with icons for 'Add object', 'Edit', 'Delete', 'Upload', 'Share patient', and 'Create CD'. On the right, there are tabs for 'Projects (2)', 'DICOM Images (1)', '3D Objects(2)', and 'Pictures (1)'. The 'DICOM Images (1)' tab is active, showing details for a CT scan:

- CT,**
- Images: 256
- 1 of 256
- Position: -312.0, -312.0, 100.0
- Thickness: 0.250
- Dimensions: 624x624
- Pixel Dimensions: 0.250x0.250
- Direction X: 1, 0, 0
- Direction Y: 0, 1, 0
- Instance number: 1
- Manufacturer: Imaging Sciences International
- Manufacturer model name: 9-17

A red arrow points to the 'Open' button (represented by a plus sign in a square) at the bottom of the image viewer. Other buttons for 'Location' and 'Delete' are also visible.

4.3. Hlavní rozvržení

Celý proces plánování, počínaje výběrem vhodného 3D objemu až po návrh chirurgické šablony, je řízen v jedinečném okně se snadným a návodným průvodcem. Všechny kroky jsou zobrazeny vlevo. Je nutné je dodržovat, abyste nezapomněli na žádnou pasáž. Stiskněte tlačítko **NEXT STEP (DALŠÍ KROK)** nebo klikněte přímo na požadovaný krok v levém svislém pruhu..

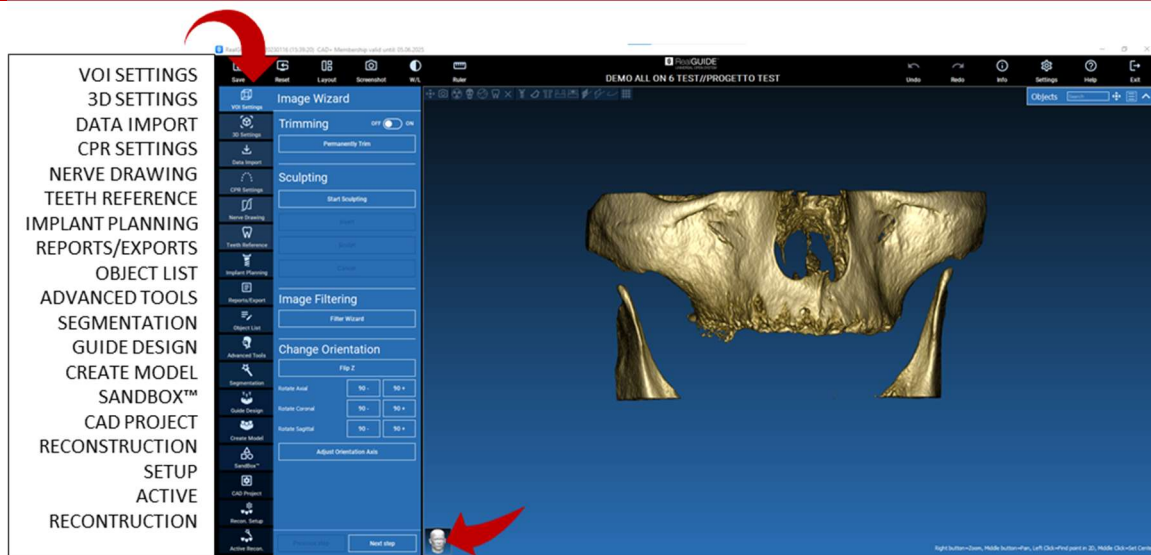




4.4. Nastavení VOI

VOI Setting

Nejprve můžete rekonstruovaný 3D objem upravit pomocí dvou různých nástrojů pro ořezávání a úpravu objemu:
TRIMMING (OŘEZÁVÁNÍ): 3D redukce objemu podél 3 hlavních anatomických rovin
SCULPTING (TVAROVÁNÍ): tvarování objemu na zakázku.

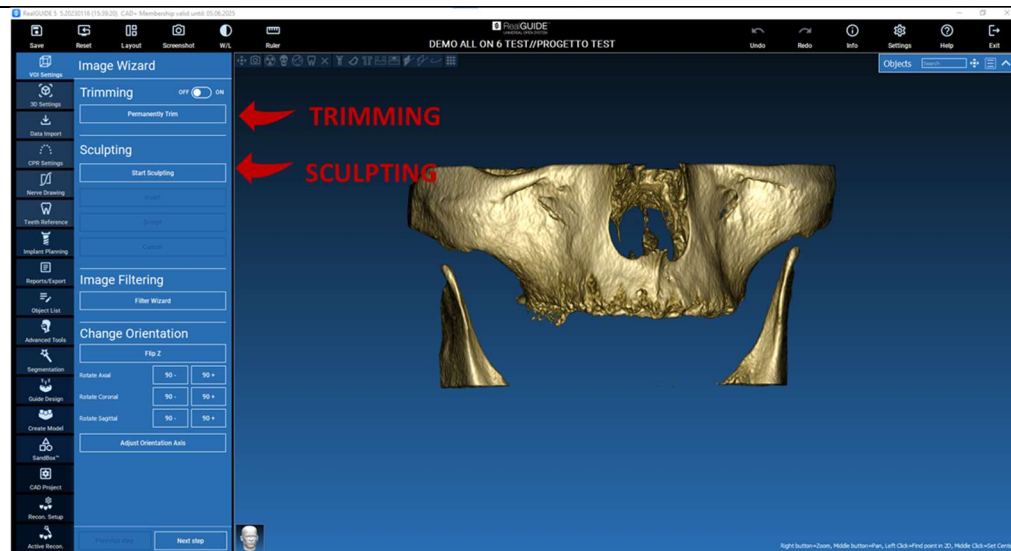




4.4.1.

OŘEZÁVÁNÍ

VOI Setting

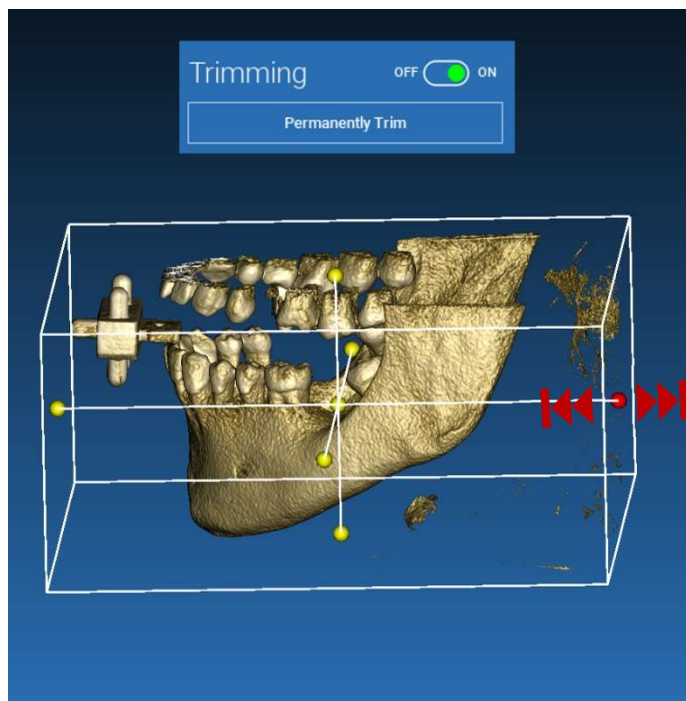

Kliknutím na tlačítko **ON/OFF** nástroj aktivujete. Kolem 3D objektu se automaticky zobrazí tři anatomické roviny.


Klikněte na žluté koule a pohybem myši omezte/rozšiřte objem rekonstrukce. Klikněte na **PERMANENTLY TRIM (TRVALE OŘEZAT)** pro potvrzení.



4.4.2. TVAROVÁNÍ

Klikněte na **START SCULPTING (ZAČÍT TVAROVÁNÍ)**, čímž začnete vybírat konkrétní oblast, kterou chcete odstranit. Klikněte levým tlačítkem myši bod po bodu kolem oblasti, kterou chcete vyříznout, a poté stiskněte tlačítko **SCULPT (VYŘEZAT)** pro potvrzení oblasti tvarování.

Kliknutím na tlačítko **INVERT (INVERTOVAT)** zachováte vybranou oblast a zbytek odstraníte. Pokud chcete výběr ignorovat, klikněte na **CANCEL (ZRUŠIT)**.

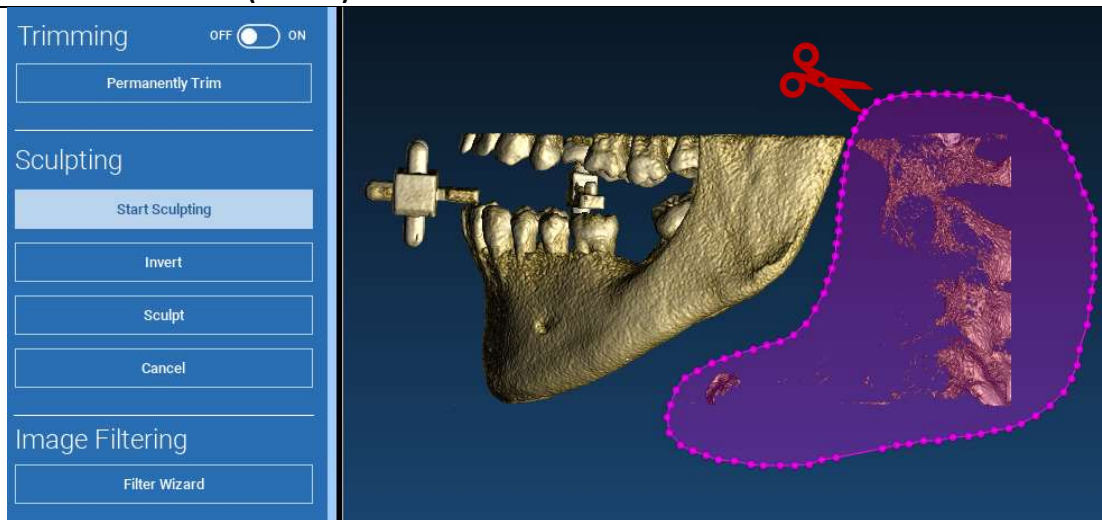




4.5. Nastavení 3D

3D Settings



V tomto druhém kroku můžete změnit nastavení 3D vizualizace výběrem požadované 3D šablony ze seznamu zobrazujícího všechny dostupné šablony.

Každá šablona představuje předem definovanou (nebo uživatelem definovanou) tkáň podle nastavení vykreslování svazků uvedených v části **VOLUME OPTIONS (MOŽNOSTI OBJEMU)**.

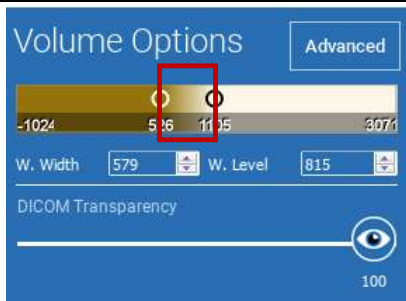

Při výběru šablony se nastavení objemu automaticky aktualizuje a připraví k jemnému doladění.



Data Import


4.6. Import dat

Import 3D Objects

Import

3D Objects

Anatomy

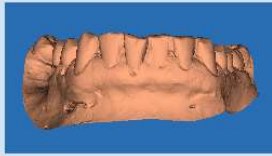

Waxup-Prosthesis



Matching


Delete

Modify/Filter

V tomto kroku se původní soubory STL, které byly předtím importovány bez úprav, zarovnaají na obrázy DICOM.


Vyberte soubor, který chcete zarovnat, a klikněte na tlačítko **MATCHING (ODPOVÍDAJÍCÍ)**.

V novém vyskakovacím okně (viz níže) zkontrolujte, zda je zvýrazněno tlačítko MATCHING (ODPOVÍDAJÍCÍ) a nastavte správný název objektu souboru, který má být zarovnán; poté kliknutím na tlačítko **OK** spusťte postup.

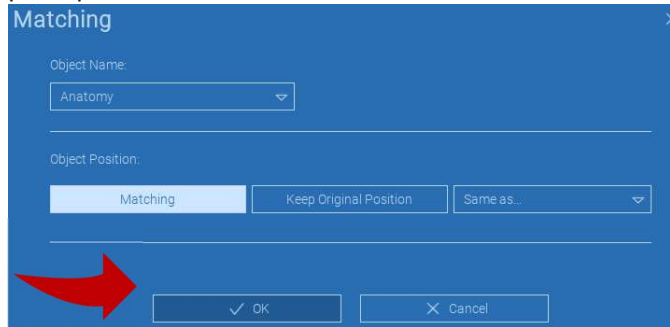

4.7. Odpovídající

Zobrazí se nové okno se dvěma různými 3D pohledy: vlevo 3D rekonstrukce DICOM a vpravo soubor STL (k zarovnání). Tyto dva soubory mají různé referenční systémy (RS), respektive CBCT a skener. Klikněte levým tlačítkem myši na oba soubory a vyberte alespoň tři odpovídající referenční body. Pro každý výběr se vezme v úvahu sféra bodů v jeho okolí pro superpozici nejlepšího přizpůsobení.

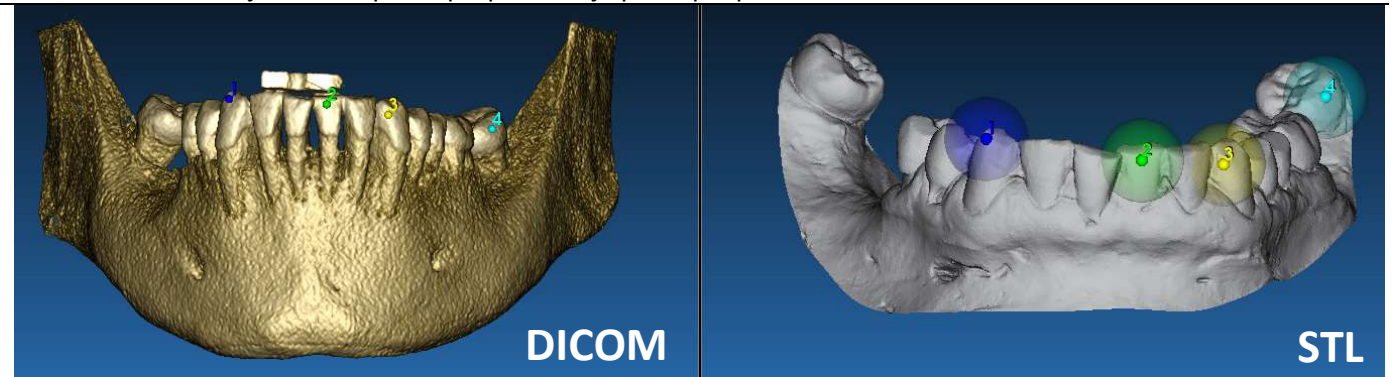


Je velmi důležité vybrat snadno identifikovatelné oblasti na obou 3D objektech. Vezměme si například povrchy značek evobite 3D a stabilní povrchy zubů (pokud není přítomna kovová konstrukce). Neberte v úvahu oblasti s vysokou úrovní rozptylu, které jsou méně spolehlivé.

Po výběru referenčních bodů klikněte na **FIT POINTS (BODY PŘÍZPŮSOBENÍ)**. Software provede základní, rigidní polohování souboru STL na základě vybraných společných bodů. Chcete-li zlepšit přesnost superpozice, klikněte na možnost **BEST FIT (NEJLEPŠÍ PŘÍZPŮSOBENÍ)**. Díky vlastnímu algoritmu nejlepšího přizpůsobení software minimalizuje vzdálenost mezi povrchy zahrnutými do sféry nastavené kolem referenčních bodů, čímž zvyšuje přesnost superpozice mezi soubory STL a DICOM. Pod tlačítkem BEST FIT se zobrazí střední hodnota chyby, která udává střední vzdálenost mezi povrchy. Zkontrolujte profily souborů STL v různých víceplošných pohledech (MPR) a případně doladte konečnou polohu pomocí widgetu objektu umístěného uprostřed snímků.



První transformaci STL můžete použít na všechny ostatní soubory. Vyberte soubor STL, který chcete zarovnat, a poté klikněte na tlačítko **MATCHING (ODPOVÍDAJÍCÍ)**, jak bylo uvedeno výše. Vyberte možnost: **SAME AS: [ANATOMY] (Stejně jako: [ANATOMIE])** a klikněte na **OK**.


Software automaticky přesune tento nový soubor na správnou pozici na základě předchozí transformace.

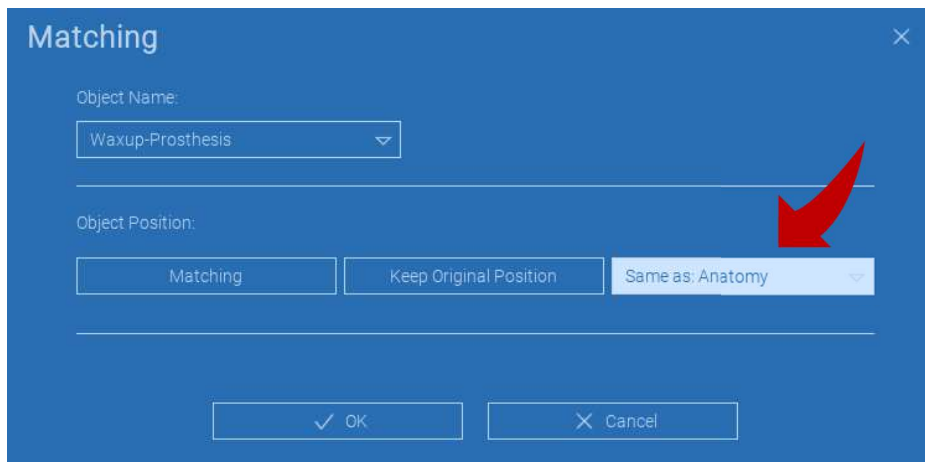


Nejdůležitějším požadavkem laboratoře je skenování a uchovávání všech souborů STL ve stejném referenčním systému!

4.8. Nastavení CPR

Kliknutím na ikonu CPR je možné nakreslit křivku CPR, která označuje rovinu rekonstrukce podél linie užitečné pro rekonstrukci panoramatického snímku. Zobrazení CPR (nebo rekonstruovaný panoramatický obraz) se vypočítá promítnutím všech hodnot voxelů viditelných v rovině kolmé na vybraný axiální obraz a protínající křivku CPR do jednoho 2D zobrazení. Výsledná plocha se pak upraví v rovině tak, aby vzniklo standardní panoramatické zobrazení.

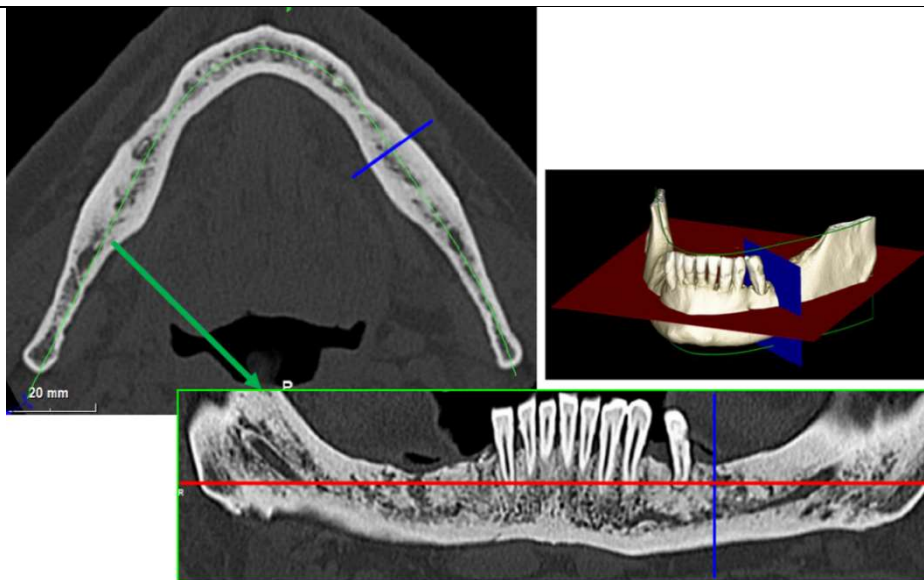

Před zahájením trasování křivky CPR vyberte, na kterém oblouku chcete pracovat. Vyberte axiální snímek, na kterém sledujete křivku CPR, a v případě potřeby upravte sklon roviny podle roviny akvizice a anatomie pacienta. Chcete-li upravit sklon letadla, klikněte na ukazatele otáčení na konci žluté čáry v pohledu průzkumníka pomocí LMB, držte jej stisknutý a táhněte myš v požadovaném směru.

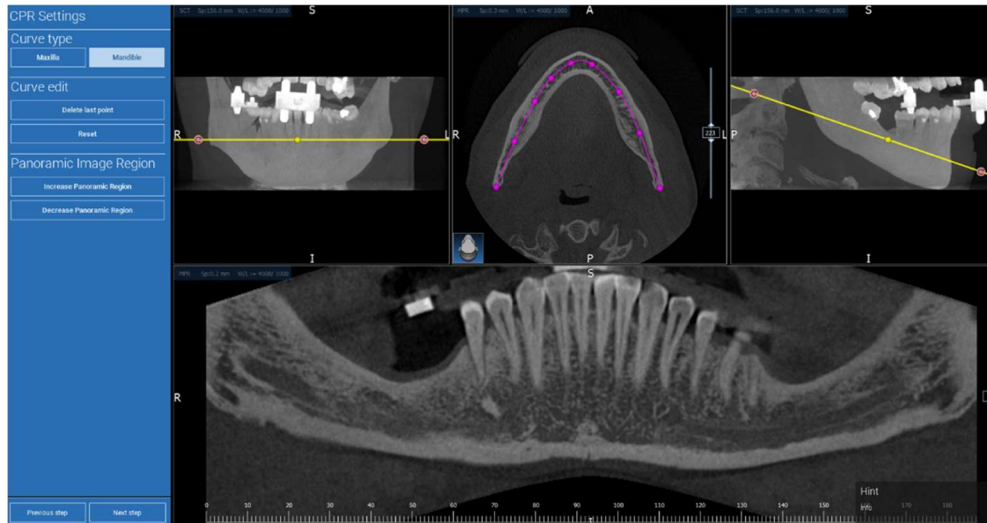




4.9. Kreslení nervů

Nerve drawing

Podél nové křivky CPR je možné sledovat pravý a levý nerv v čelistním oblouku. Začněte kreslit pravý nerv na zobrazení CPR kliknutím na body levým tlačítkem myši. Body lze upravit také v zobrazení průřezu. Klepnutím na **RESET** znovu spustíte kreslení. Posouváním kolečka myši můžete měnit panoramatický obraz a sledovat polohu nervů v různých rovinách. Klepnutím na tlačítko **FINISH DRAWING (DOKONČIT KRESLENÍ)** objekt dokončíte. Poté klikněte na tlačítko **ADD LEFT NERVE (PŘIDAT LEVÝ NERV)** a začněte s levou stranou dolní čelisti.

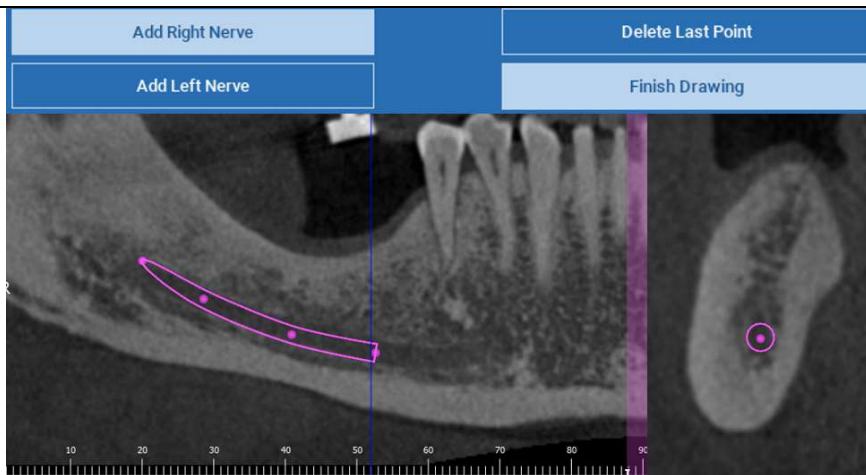




4.10. Nastavení zubů

Před umístěním implantátů je nutné identifikovat všechny prvky, které je třeba rehabilitovat. Klikněte na požadovaný prvek a poté vyberte odpovídající oblast (digitální vosk nebo bezzubé oblasti) na 3D rekonstrukci. Virtuální voskovku můžete vložit také kliknutím na tlačítko **ADD (PŘIDAT)** a upravit objem a polohu přímo v zobrazení 3D nebo MPR. Po dokončení všech operací pokračujte kliknutím na **NEXT STEP (DALŠÍ KROK)**.



4.11. Poloha implantátu


Všechny dříve vybrané prvky jsou označeny světle modrou barvou. Kliknutím na ně otevřete okno s implantáty knihovny.

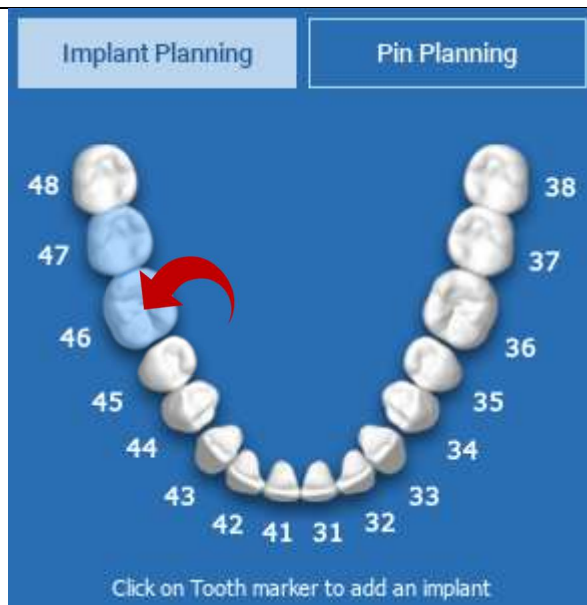




4.11.1. KNIHOVNA IMPLANTÁTŮ

V novém okně je již standardní implantát umístěn uvnitř kosti v oblasti, která byla dříve vybrána. Z CLOUDu je možné stáhnout požadovanou knihovnu implantátů a následně vybrat nejvhodnější protetickou komponentu. Kliknutím na tlačítko **APPLY (APLIKOVAT)** potvrďte a vraťte se do okna pro plánování implantátů.

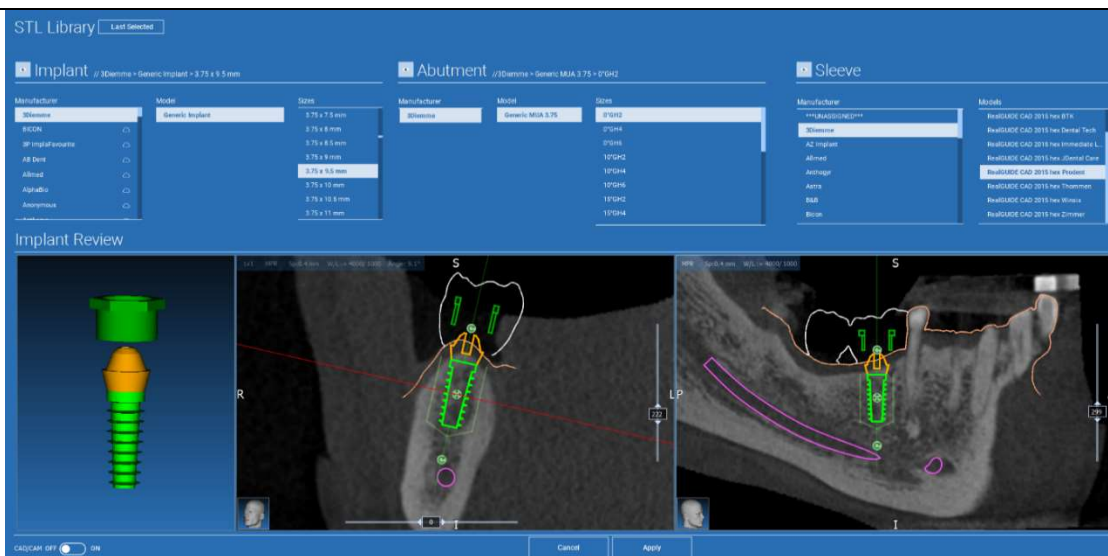



4.11.2. NASTAVENÍ POLOHY IMPLANTÁTU

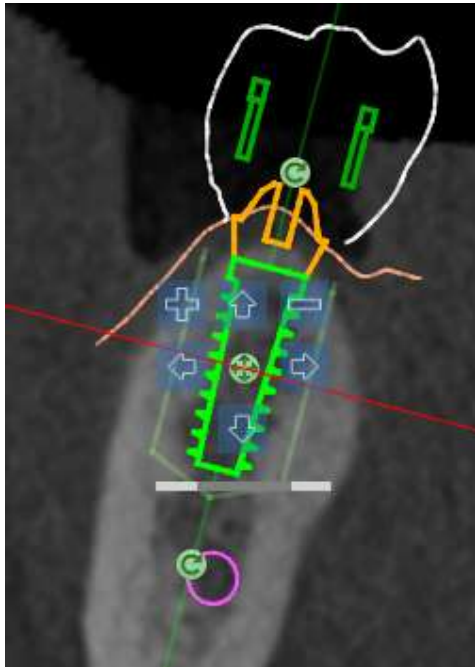

Seznam tlačítek umožňuje upravit polohu implantátu ve všech 2D zobrazeních:



Změna úhlu implantátu: otáčejte horní částí implantátu, přičemž apex zůstává fixován.



Zvětšení/zmenšení rozměru implantátu



Posunutí implantátu (0,5 mm za každé kliknutí levým tlačítkem myši ve zvoleném směru). Implantátem lze také pohybovat podél jeho osy pomocí šipek (NAHORU a DOLŮ).



Změna sklonu implantátu: otáčejte vrcholem implantátu, přičemž horní část zůstává pevná.




Implantát můžete posouvat kliknutím na tlačítko umístěné uprostřed objektu.

4.11.3. VÝBĚR PROTETICKÝCH ABUTMENTŮ

Po umístění implantátu na správné místo je možné zvolit/modifikovat jeho abutment a upravit protetickou osu.


Abutment //3Diemme > Generic MUA 3.75

Manufacturer	Model
3Diemme	Generic MUA 3.75

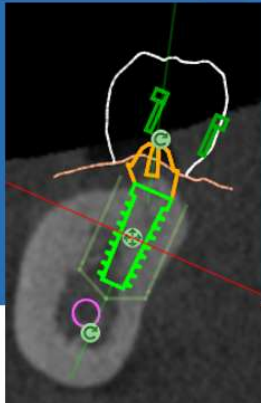

Sizes


- 17°GH2
- 17°GH4
- 17°GH6
- 20°GH2
- 20°GH4
- 20°GH6
- 25°GH2
- 25°GH4

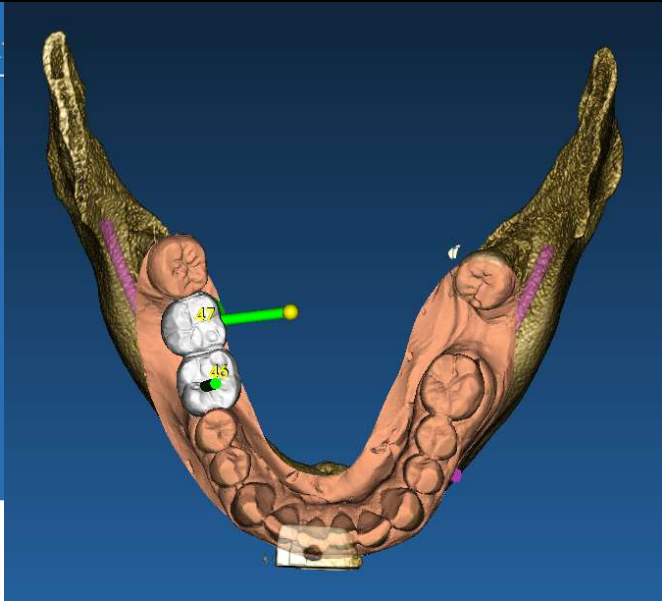



4.11.4. OTÁČENÍ OSY

Orientaci osy abutmentu můžete změnit (při zachování pevné osy implantátu) posunutím posuvníku na tlačítko uvedené na obrázku níže. Kontrolujte ji také v okluzním 3D zobrazení, abyste byli přesnější.

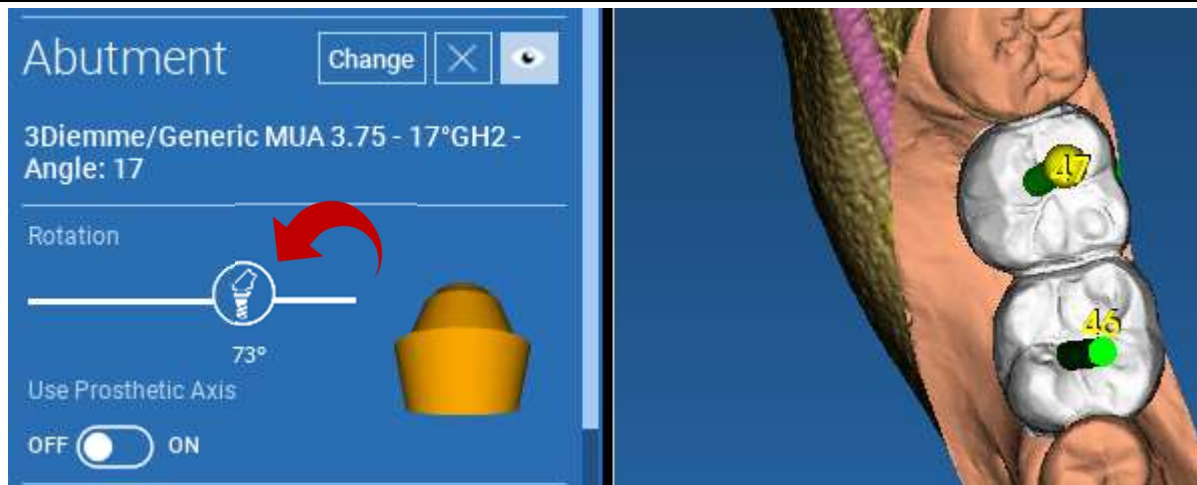


4.11.5. ROVNOBĚŽNOST OS PROTÉZY

Nová verze umožňuje ovládat rovnoběžnost osy protézy ve dvou jednoduchých krocích:

Klikněte pravým tlačítkem myši na osu protézy, kterou chcete upravit;

Poté vyberte možnost **SET THE AXIS PARALLEL TO (NASTAVIT OSU PARALELNĚ K)** a vyberte prvek, se kterým chcete zarovnat.

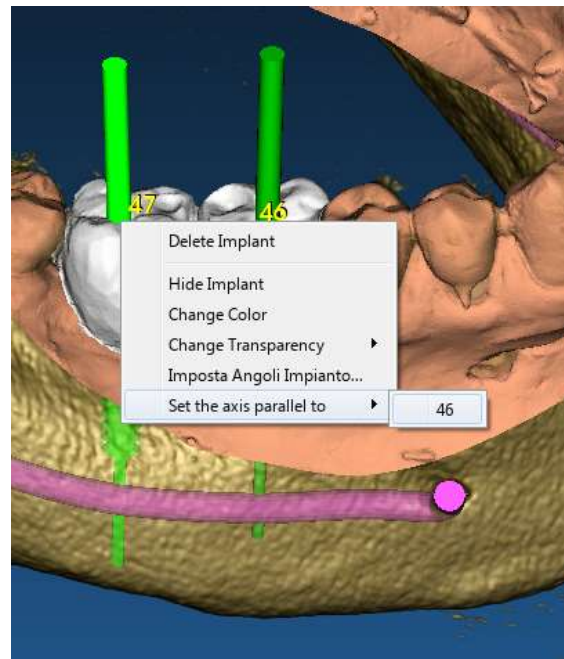


Osa protézy se automaticky aktualizuje a nastaví rovnoběžně s referenčním implantátem.



Nyní, když jste dosáhli rovnoběžnosti os protéz, se ujistěte, že jsou všechny implantáty ještě v bezpečné poloze.

Pokud chcete provést nějaké úpravy, aktivujte možnost **USE PROSTHETIC AXIS (POUŽITÍ PROTETICKÉ OSY)**, jak je znázorněno na obrázku. Pouze v tomto případě budete moci měnit osu implantátu otáčením implantátu kolem osy protézy, přičemž osa protézy zůstane fixována ve správné poloze.

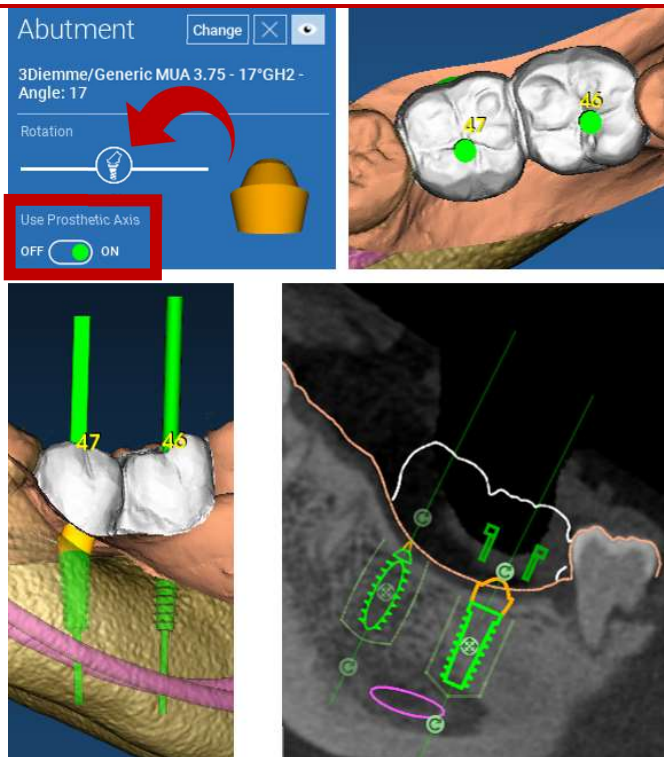


5. Pokročilé nástroje

5.1. TMJ

Po zapnutí tlačítka TMJ se rozložení oken přepne do režimu TMJ, kdy jsou snímky MPR rozděleny na 2 části, aby bylo možné analyzovat TMJ odděleně, ale současně.

- Pomocí LMB umístěte kurzory na levou/pravou TMJ
- Klikněte na tlačítko THIN SLAB (TENKÁ DESKA) pro lepší analýzu kondylu bez zásahu do čelistní jamky (interaktivní režim)
- Přepnutím tlačítka THIN SLAB (TENKÁ DESKA) se vrátíte do předchozího režimu vizualizace
- Přepnutím tlačítka TMJ se vrátíte do předchozího režimu vizualizace

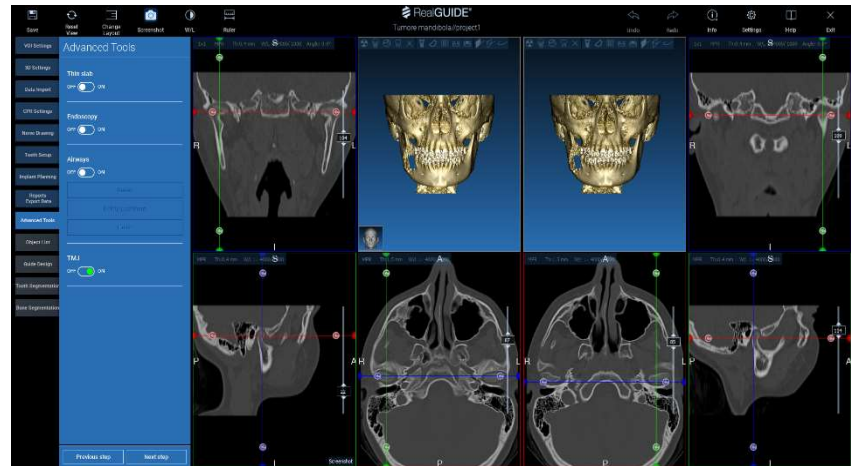

6. Konstrukce chirurgické šablony



6.1. Spuštění procesu


Po dokončení plánování implantátu je možné přejít k návrhu chirurgické šablony kliknutím na kartu Guide Design v levém panelu nabídky. Aktivuje se řízený postup, který uživateli umožní nastavit parametry konstrukce.





6.2. Nastavení blokování podříznutí


V postranní nabídce se zobrazují příkazy, které upravují blokování podřezání modelu, stejně jako předběžné voskování. Bude možné definovat tloušťku, úhel vyjetí, stupeň přilnavosti a hladkost virtuálního voskování.

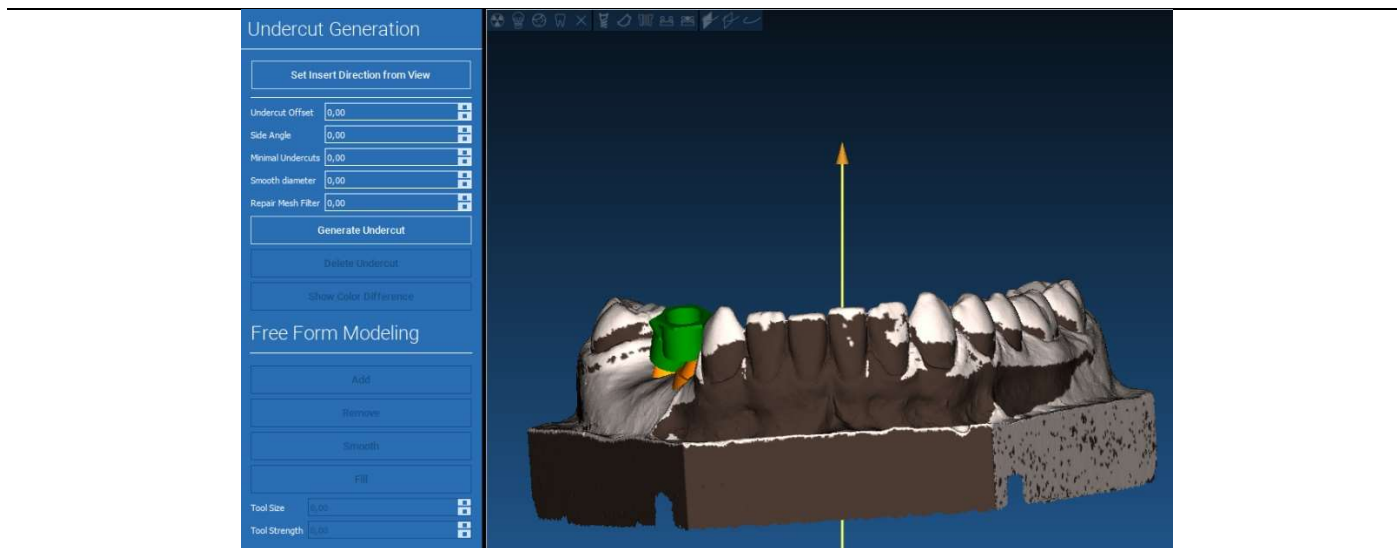



6.2.1. SMĚR VLOŽENÍ - OVLÁDACÍ ŠIPKA


Šipka zobrazená ve středu modelu určuje směr osy vložení, který se vypočítá automaticky vzhledem k tvaru modelu. Tento směr vložení a vytvořené stínové oblasti (hnědá barva) upravíte přetažením bodu šipky v požadovaném směru.

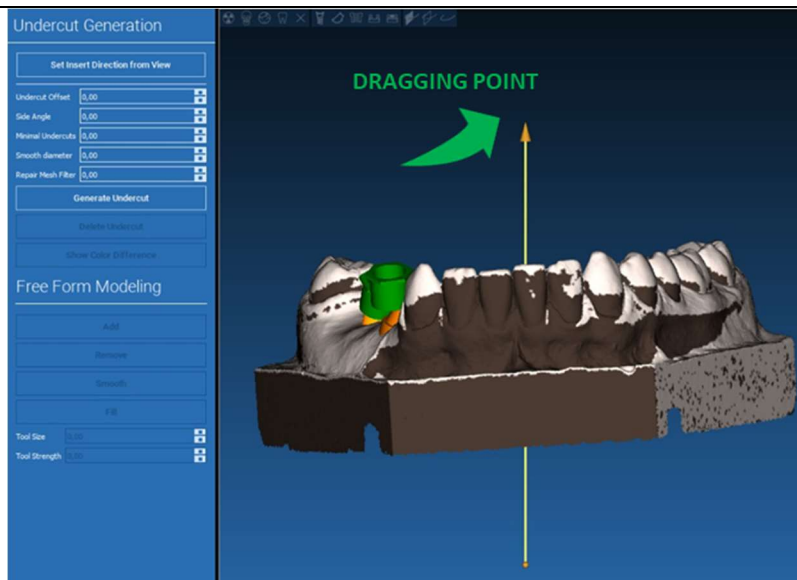



6.2.2. SMĚR VLOŽENÍ - SMĚR ZOBRAZENÍ


Směr osy vložení je možné definovat i při pohybu modelu v požadovaném úhlu zobrazení. Kliknutím na tlačítko **SET DIRECTION FROM VIEW (NASTAVENÍ SMĚRU ZE ZOBRAZENÍ)** se směr osy šipky nastaví kolmo k povrchu obrazovky.

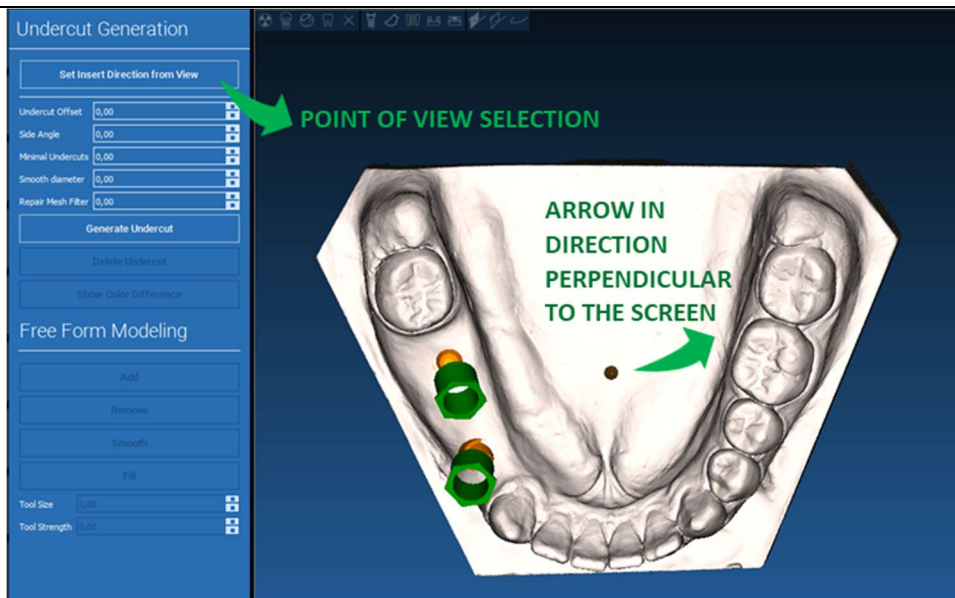



6.2.3. GENEROVÁNÍ VOSKOVANÉHO POVRCHU

Jakmile je definován směr osy vkládání, kliknutím na tlačítko **GENERATE UNDERCUT (GENEROVAT PODŘEZ)** se spustí generování voskovací plochy. Tuto plochu je také možné lokálně upravovat, kontrolovat vzdálenost od modelu, aktivovat modelovací funkce a tlačítka pro vizualizaci mezer umístěná v pravém menu. Kliknutím na tlačítko **NEXT STEP (DALŠÍ KROK)** v nabídce se spustí poslední část konstrukce šablony.

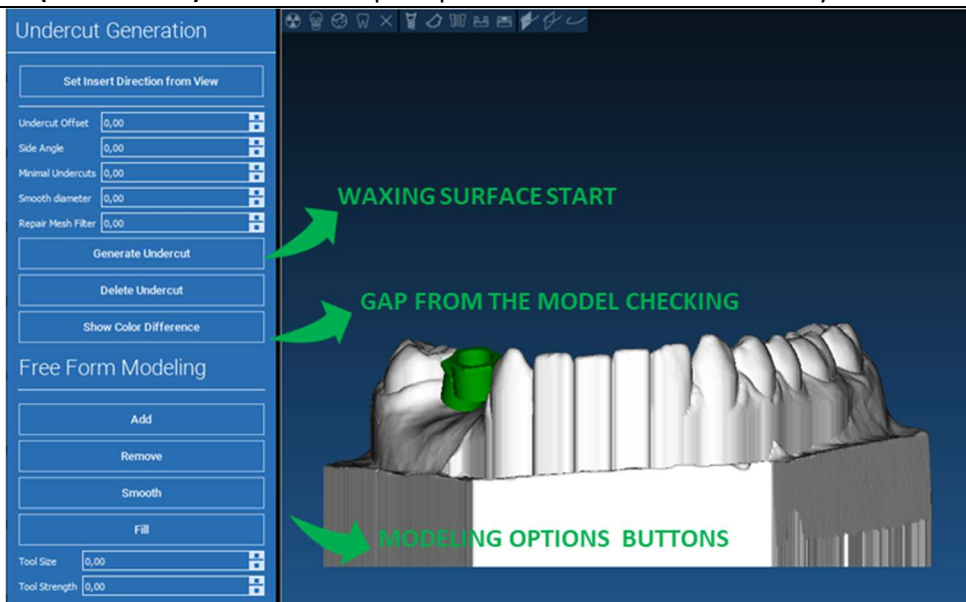



6.2.4. Parametry trasování a konstrukce


Obkreslení vnějšího vodícího okraje kolem oblasti na modelu: příkaz je ve výchozím nastavení aktivní. Řídící bod se přidá po kliknutí myší. Není nutné uzavírat smyčku oblasti, stačí umístit poslední bod blízko prvního. Poté zkontrolujte a definujte toleranci uložení, okluzní a boční hodnoty tloušťky. Chcete-li případně upravit definovaný okraj, klikněte a přetáhněte libovolný bod na požadované místo, kliknutím na tlačítko **CREATE GUIDE (VYTVORIT ŠABLONU)** potvrďte a přejděte ke konstrukci objemu.





6.3. Nástroje pro modelování


Po vytvoření vodícího objemu se aktivují modelovací nástroje. Umožňují přidávat/ubírat materiál, vyhlazovat povrch a vyplňovat prohlubně. Obvykle se používají k vyhlazení okrajů a ke zpevnění míst s hlubokými prohlubněmi.

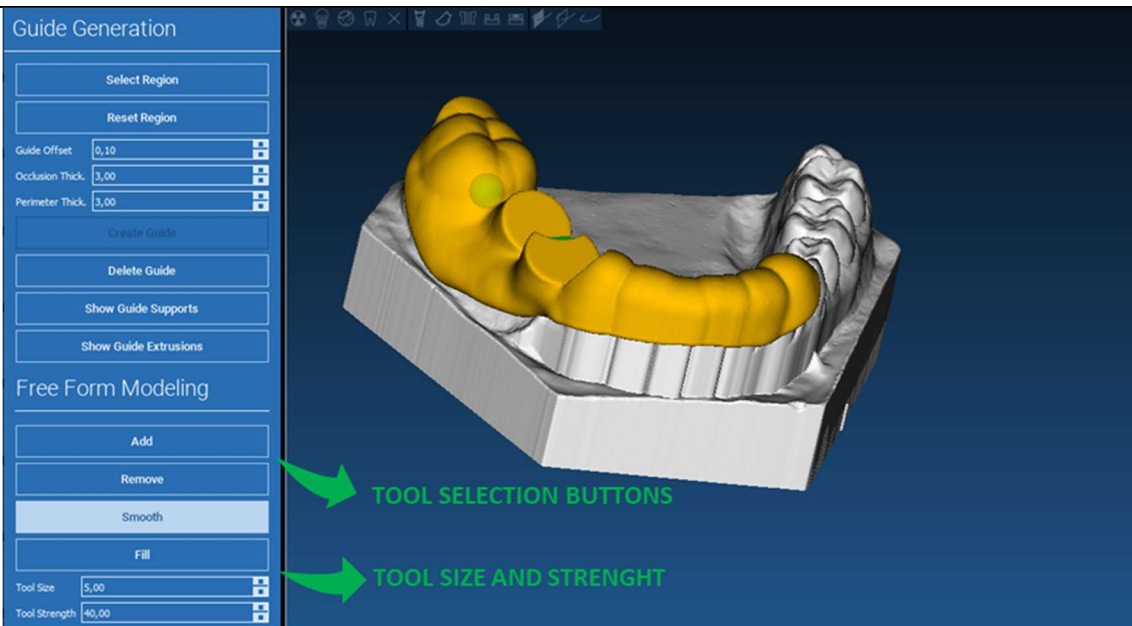



6.4. Okna pro kontrolu a opětovné podání anestetik

Pod nástroji pro modelování se nacházejí příkazy pro generování válcových otvorů a obdélníkových drážek s jejich hloubkovými a rozměrovými parametry. Kliknutím na vodící plochu v požadované poloze se vygeneruje vybraná geometrie s osou orientovanou podél směru pohledu uživatele.

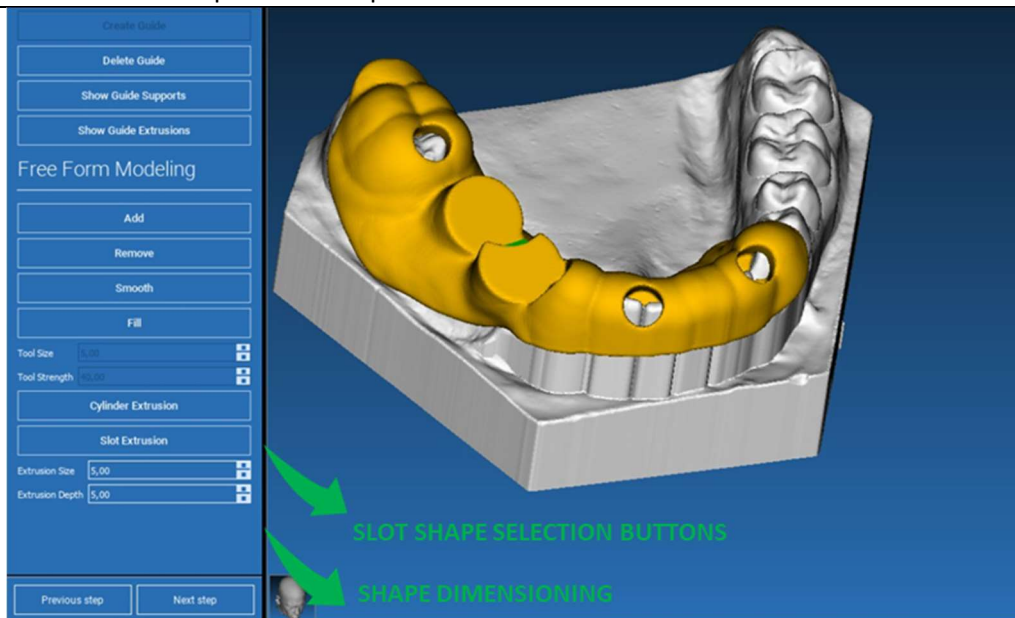



6.5. Finalizace


Kliknutím na tlačítko **NEXT STEP (DALŠÍ KROK)** bude generování šablony dokončeno konstrukcí sedel pouzdra. V postranní nabídce se objeví záložka **REPORTS / EXPORT DATA**, která umožňuje operace exportu souborů STL.

The screenshot displays the 'Reports / Export Data' sidebar on the left, which includes sections for 'Report', 'Export', and 'Share'. The 'Export' section contains buttons for 'Export Visible Objects', 'Export STL files', 'Export Guide', 'Export for CAD/CAM', 'Export for PlastyCAD', and 'Export segmented anatomy'. A green arrow points to the 'Export STL files' button, with the text 'TLAČÍTKO PRO EXPORT ŠABLONY' (Button for template export) overlaid in green. The main window shows a 3D model of a dental arch with a yellow guide and green circular markers. A 'Hint' box with a 'Save' button is visible in the bottom right of the 3D view. Below the 3D view, a cross-sectional view of the teeth is shown with yellow outlines.


7. Segmentace

7.1. Segmentace zubů

Aktivujte režim BRUSH (KARTÁČ) a ručně obkreslete požadovaný obrys zubu, přičemž držte stisknuté tlačítko LMB. Pokud je zapnuta funkce AUTO SEGMENT, zub se extrahuje, jakmile uvolníte LMB, jinak klikněte na tlačítko TOOTH SEGMENT (SEGMENT ZUBU). Upravte semínka pro upřesnění tvaru zubu (CTRL+LMB pro přidání semínek, SHIFT+LMB pro přidání semínek na pozadí).

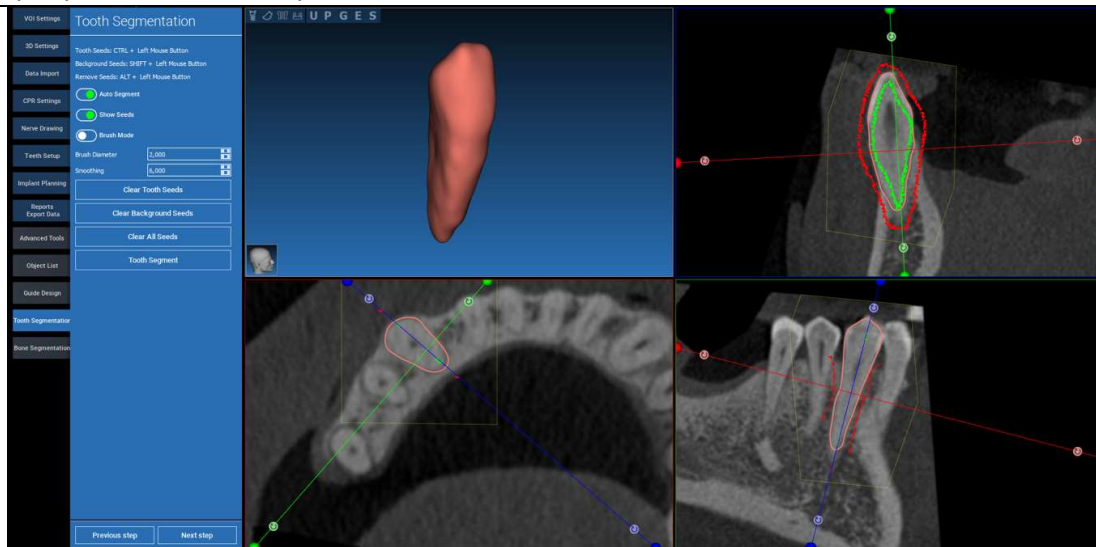


K dalšímu zdokonalení povrchu zubu použijte modelovací nástroje FREEFORM

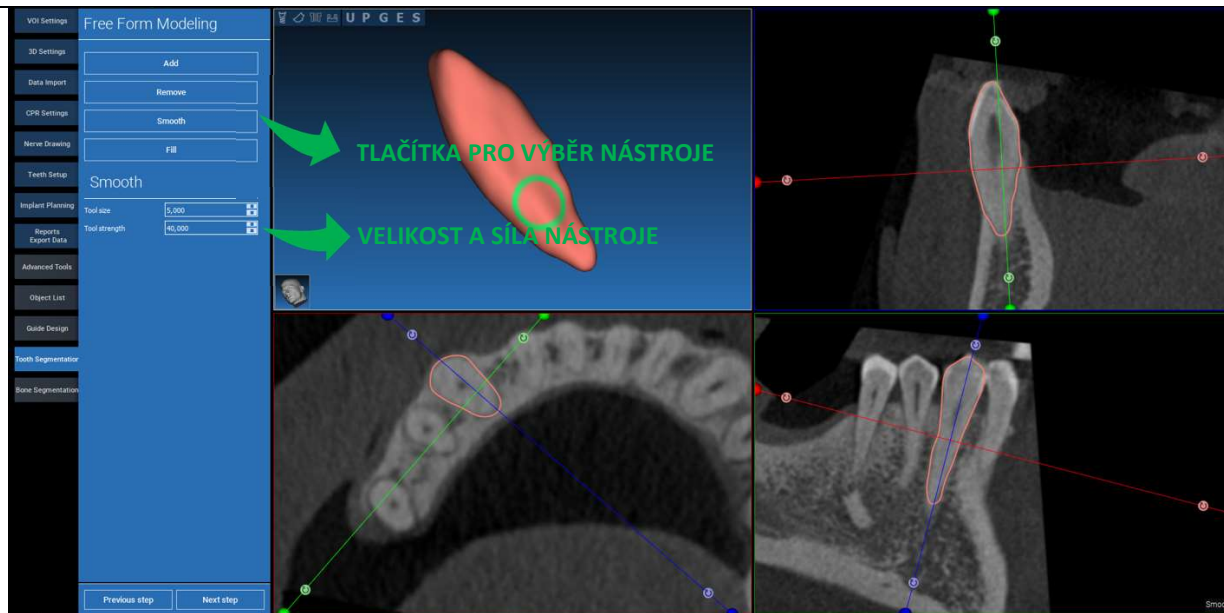


7.2. Segmentace kosti

Nastavte prahové hodnoty pro kost a pozadí. Pokud je zapnuta funkce AUTO SEGMENT (SEGMENT AUTO), kost se extrahuje ihned po uvolnění LMB, jinak klikněte na tlačítko BONE SEGMENT (SEGMENT KOSTI). Upravte semínka pro upřesnění tvaru kosti (CTRL+LMB pro přidání semínek, SHIFT+LMB pro přidání semínek na pozadí).

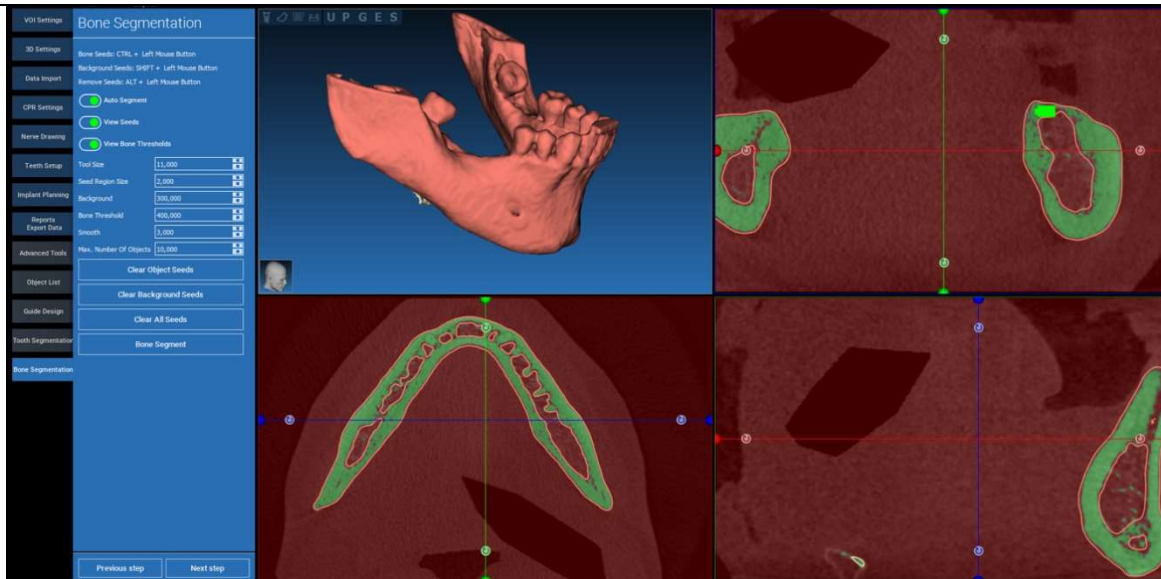


K dalšímu zpřesnění povrchu kosti použijte modelovací nástroje FREEFORM

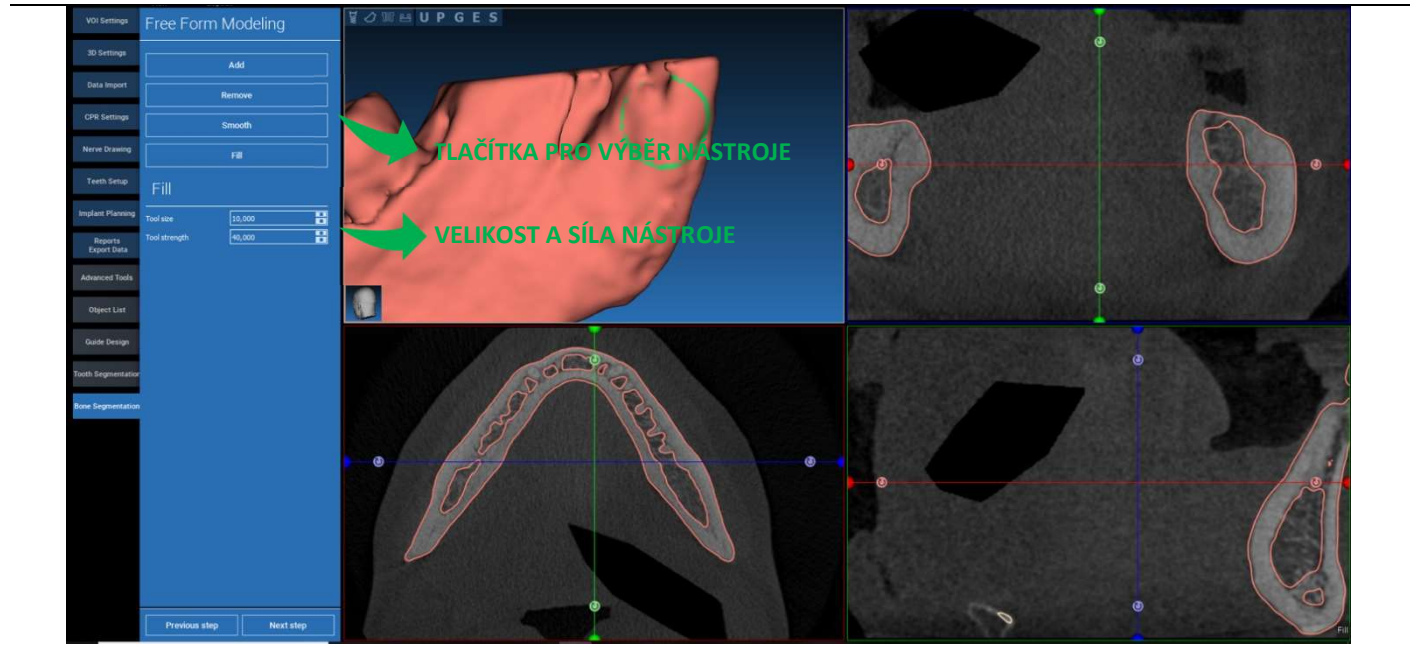

8. Sandbox

Kliknutím na ikonu SandBox získáte přístup ke specializovaným nástrojům:

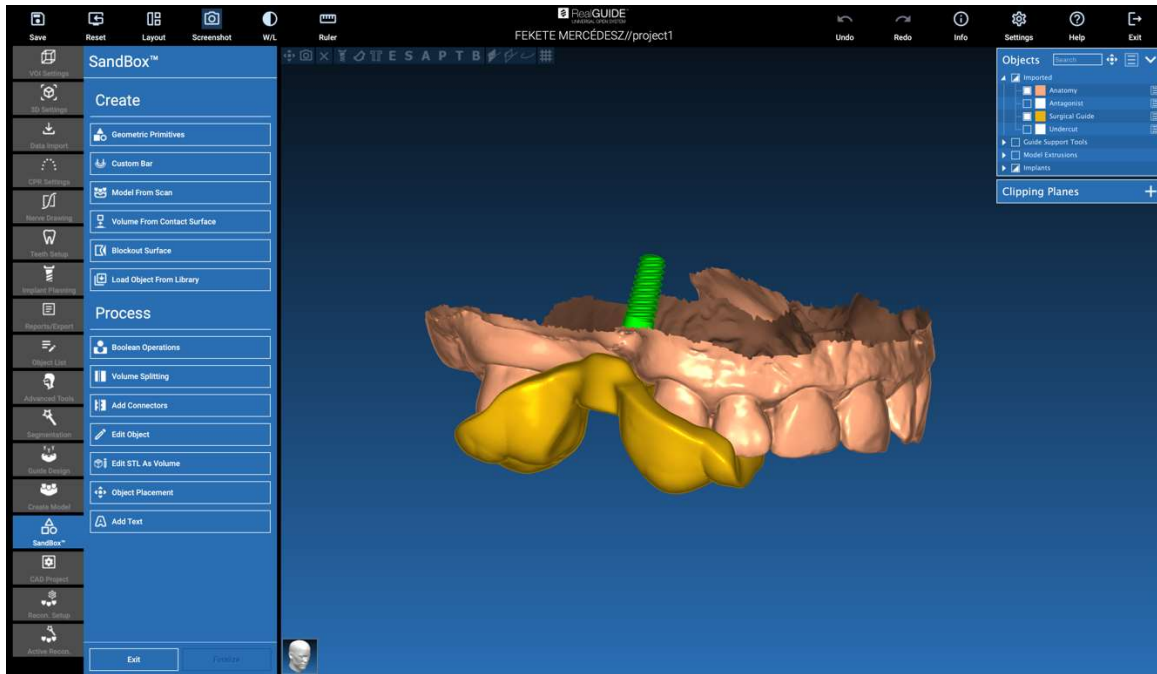

Prostředí SandBox je rozděleno na 2 části:

CREATE (VYTVOŘIT): vytváří nové objekty uvnitř projektu. Skládá se z následujících funkcí:

- **Geometric primitives (Geometrická primitiva):** generování parametrických geometrických primitiv a jejich umístění v 3D prostoru
- **Custom bar (Vlastní tyč):** generování geometrie trubkového tvaru s vlastním průřezem a volným umístěním ve 3D prostoru
- **Model from scan (Model ze skenu):** převod skenu na skořepinový nebo uzavřený model
- **Volume from contact surface (Objem z kontaktního povrchu):** umožňuje generovat vlastní objem vycházející z výběru povrchu, což je užitečné pro vytváření kostních štěpů, mřížek, částí chirurgických šablon
- **Blockout surface (Blokovací plocha):** generování plochy bez podříznutí podle nastavení uživatele
- **Load Object from Library (Načíst objekt z knihovny):** umožňuje vložit dříve uložené objekty z knihovny do 3D prostoru


PROCESS (PROCES): umožňuje zpracovávat všechny objekty vytvořené uvnitř nebo vně SandBoxu:

- **Boolean operations (Logické operace):** provádějte libovolné logické operace mezi objekty vybranými uživatelem
- **Volume splitting (Rozdělení objemu):** vytvoření vlastního slotu pro provedení rozdělení objemu
- **Add connectors (Přidání konektorů):** spojte rozdělené díly pomocí uživatelsky definovaných konektorů pro správnou montáž
- **Edit object (Upravit objekt):** Nástroje pro zpracování souborů STL
- **Edit STL as Volume (Úprava STL jako svazku):** převod uzavřeného povrchu na objem pro rychlejší modelování volných tvarů
- **Object placement (Umístění objektů):** změna polohy 3D objektů v 3D prostoru
- **Add Text (Přidat text):** přidání textu na povrch objektů


9. CAD

Prostředí CAD umožňuje modelování zubních protéz importem následujících dat:


- **Import New Files (Import nových souborů)** (optické skeny nebo 2D obrázky)
- **Import z projektu RealGUIDE™** (3D objekty, 2D obrázky, referenční zuby, plánované implantáty)

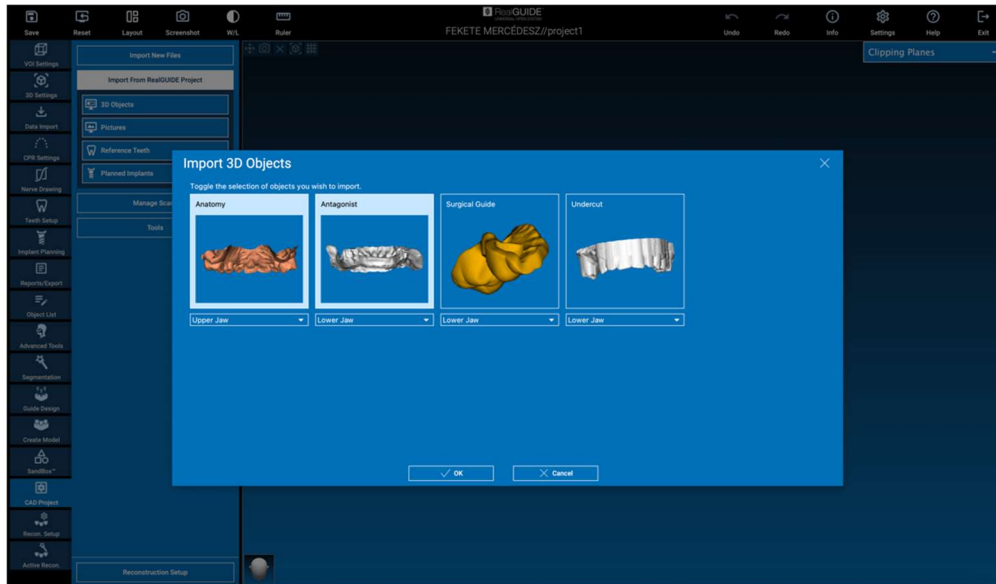


Po importu souborů je možné kliknout na RECONSTRUCTION SETUP a navrhnout požadovanou protézu podle postupného procesu, který začíná výběrem **RECONSTRUCTION TYPE (TYP REKONSTRUKCE)**:

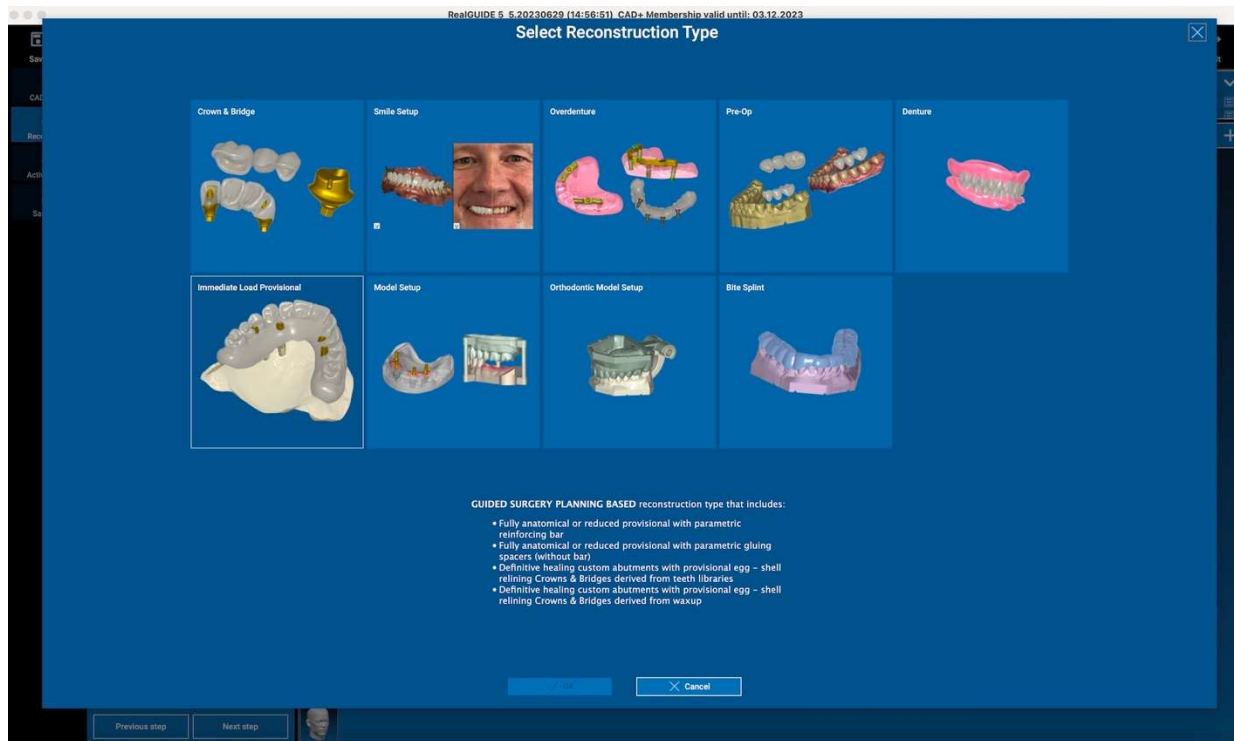


Typ rekonstrukce určuje makrooblast rehabilitace; po výběru rekonstrukce se zobrazí okno pro výběr **WORKFLOW (PRŮBĚH PRÁCE)**, které určuje konkrétní postup, který se použije k modelování protézy:

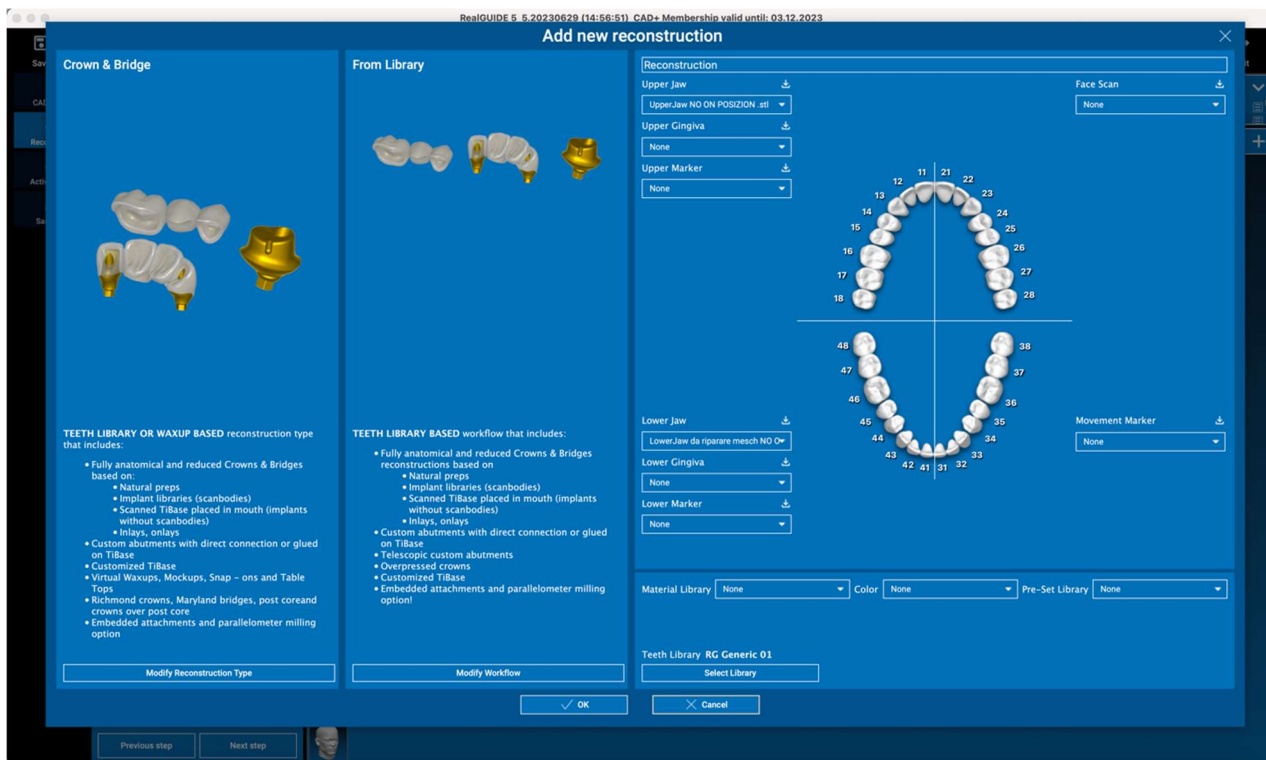


Po výběru pracovního postupu je třeba určit správné soubory, které se mají použít (anatomie, antagonista,...), knihovnu zubů a případně materiály, které se mají použít k výrobě protézy, podle konkrétní knihovny sdílené výrobním centrem:

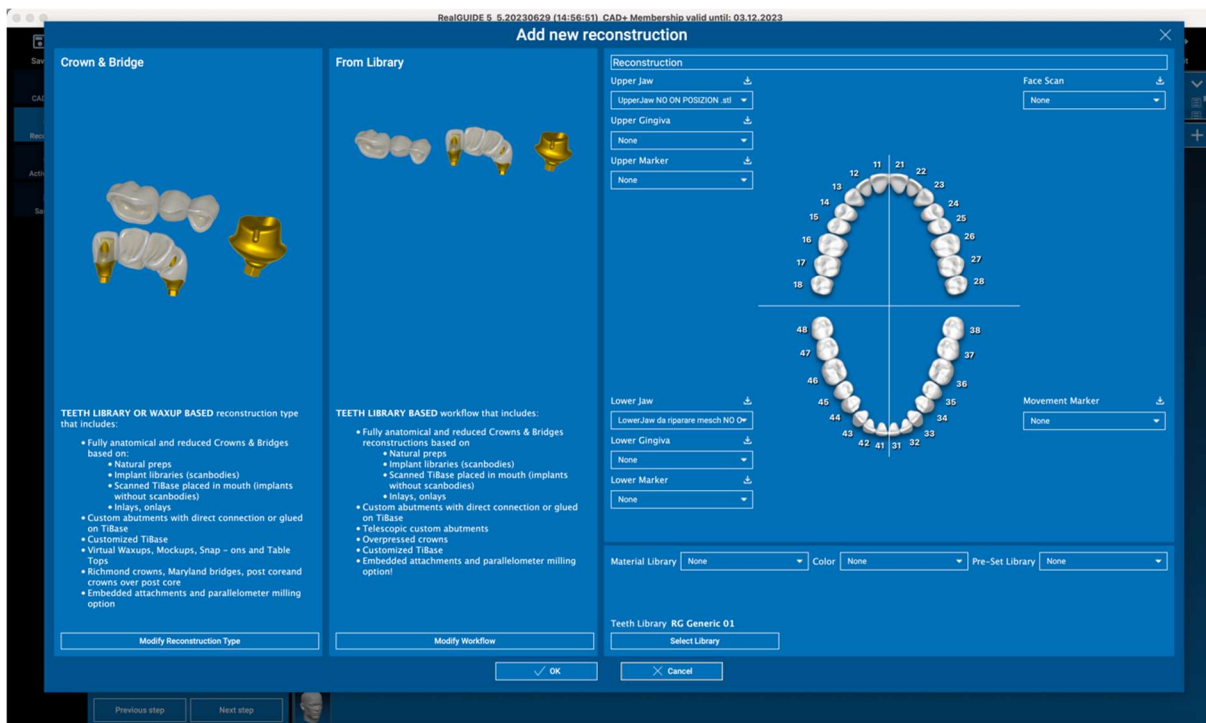



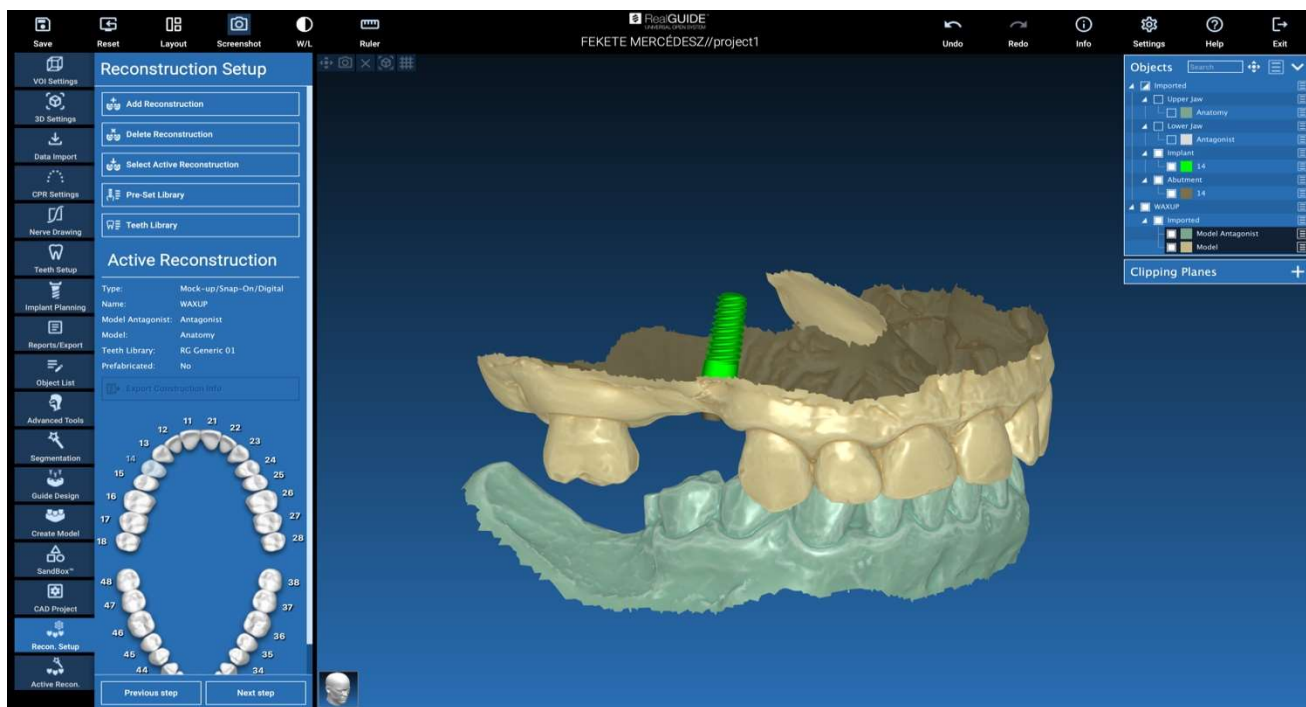

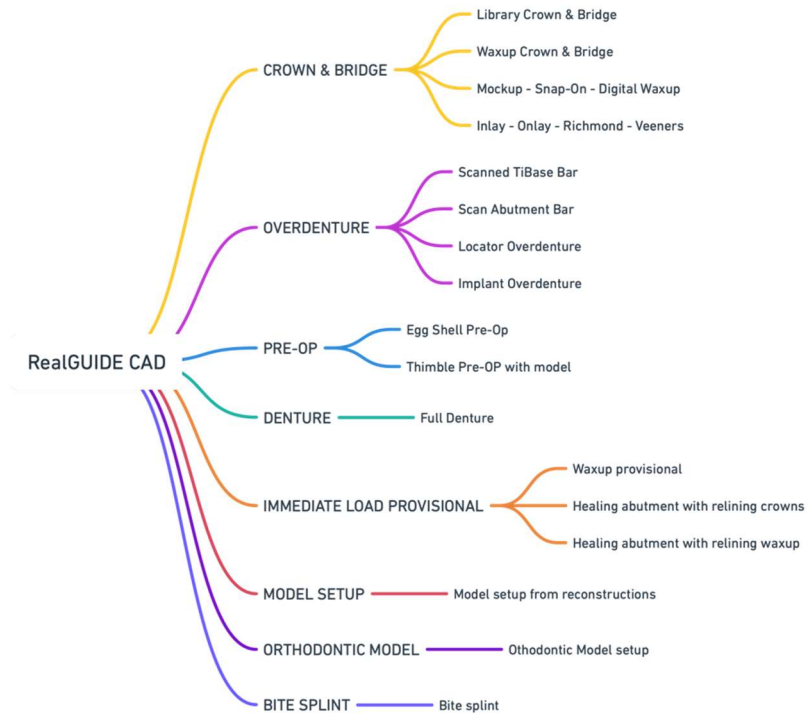


Kliknutím na tlačítko OK potvrďte výběr a zobrazí se stránka s životopisem. Pokud je vše v pořádku, kliknutím na DALŠÍ KROK se spustí průvodce, který provede všemi kroky modelování protězy podle zvolené rekonstrukce/pracovního postupu:



V následujícím schématu jsou uvedeny všechny rekonstrukce a připojené pracovní postupy dostupné v RealGUIDE:



Definice slovníku symbolů

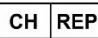Symbol	Popis
	Výrobce
 eIFU	Přečtěte si návod k použití
	Zdravotnický prostředek
	Označení shody CE
	Upozornění: Federální zákony omezují prodej tohoto zařízení zubním lékařům nebo na objednávku (trh USA)
	Distribuce
	Švýcarský zplnomocněný zástupce

Další informace o používání RealGUIDE™ jsou k dispozici na (videonávody) www.3diemme.it/it/video-tutorial a (nejčastější dotazy) helpdesk.3diemme.it.